


en Oxygen Mask, High Concentration, Non-Rebreather
da Ilmtaske, Høj koncentration uden genånding
sv Syrgasmask, hög koncentration, icke-återändningsbar
no Oksygenmaske, Høy koncentrasjon uten gjenånding
fi Happimaski, korkea pitoisuus, ei-takaisinhengitys
ru Кислородная маска, высокой концентрации, нереверсивная
de Sauerstoffmaske, hohe Konzentration, ohne Rückatmung
nl Zuurstof masker,hoge concentratie,non-rebreather
fr Masque à oxygène, Haute Concentration, Sans Réinspiration
pl Maska tlenowa do wysokich stężeń bez oddechu zwrotnego
es Mascarilla de oxígeno, alta concentración, sin reinhalación
pt Máscara de oxigénio, de alta concentração, sem reinalação
it Maschera ossigeno, Alta concentrazione, senza rいrespirazione
cs Kysliková maska, vysoká koncentrace bez recyklace vzduchu
tr Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi, Gerisolumasız
gr Μάσκα Οξυγόνου, Ύψη λήξης Συγκέντρωσης, Μη Επανεύστροφη

(en) Oxygen Mask, High Concentration, Non-Rebreather

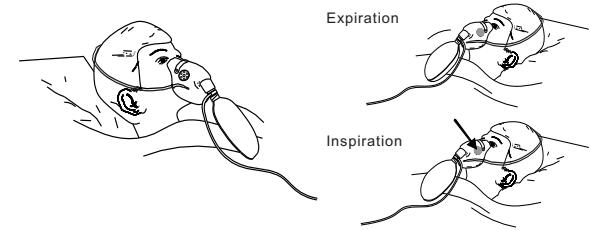

Description

Oxygen Mask, High Concentration, Non-Rebreather is a disposable oxygen mask which can be used as a high concentration oxygen mask or as a partial rebreather mask.

Oxygen tubing (if included) can be connected to the Oxygen flow-meter via Fits-All connector without requiring an additional adapter.

Contraindications

Severe Hyperoxia, Apnea

Warnings

- Oxygen, while not flammable, supports combustion. Do not use near excessive heat, open flames, or other sources of ignition.
- This device is intended for single-use only and should not be reused. Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination and physical properties of the device may no longer be optimal for intended use.
- Use of low Oxygen flow rates may result in excessive rebreathing of CO₂.
- Sterilization or use of cleaning solutions may result in retention of harmful residues.
- Always ensure tight connection before use. Monitor proper connection during use.


Instructions for Use

- Unpack and connect to Oxygen supply.
- Inflate reservoir bag completely prior to application.
- Place mask over patient's face and adjust for best fit.
- Set Oxygen flow to a rate preventing the bag from fully collapsing, when patient inhales. Observe bag for sufficient replenishment.
- To use as a partial rebreather mask: Remove rubber discs on mask sides and bottom.

Symbols and explanations

REF	Catalogue number	Use-by date	LOT	Batch code
	Do not re-use			Use-by date
	Manufacturer			Batch code
	Do not use if package is damaged			
EC REP	Authorised representative in the European Community			

(da) Ilmtaske, Høj koncentration uden genånding

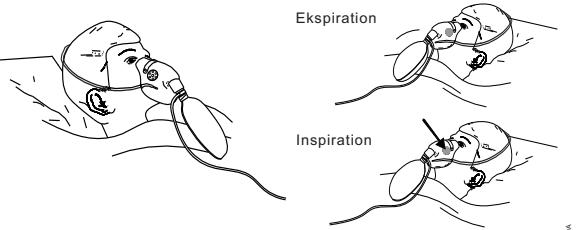

Beskrivelse

Ilmtaske, Høj koncentration, uden genånding er en engangsiltmaske som kan anvendes som høj koncentrationsiltmaske eller som delvis genåndingsmaske.

Itslangen (hvis inkluderet) kan tilsluttes iltfloymeteret via Fits-All konnektoren uden brug af ekstra adaptor.

Kontraindikationer

Svær hyperoxi, Apnø

Advarsel

- It er ikke brandfarlig men understøtter forbrenningen. Anvend derfor ikke i nærheden af åben ild, overophedning eller anden antændelseskilde.
- Denne enhet er endast avsedd for engångsbruk og skal ikke återanvändas. Återanvändning kan leda till ökat risk för infektion eller korskontaminering. Fysikaliska egenskaperna på produkten kanske inte längre är optimal för att hålla den avsedda användningen.
- Vid låg syrgas flödestasigheten kan resultatet bli för hög återandning av CO₂.
- Sterilisering eller bruk av anden rengöringsmetode kan resultere i retention av skadelige restsubstanser.

- ⚠ Kontroller alltid för bruk, att tilslutningen är tät. Kontroller under bruk att tilslutningen är korrekt.


Brugsanvisning

- Pak ud og tilslut til ittlifstørrelse.
- Reservoirposen fyldes helt op før applicering.
- Placer masken over patientens ansigt og juster for bedst mulig pasform.
- Sæt iltfloymeteret til en mængde som forhindrer reservoirposen i at klappe sammen når patienten inhalerer. Observer at reservoirposen genopfyldes tilstrækkeligt.
- For at anvende som delvis genåndingsmaske: Fjern gummiringenene på maskens sider og underside.

Symboler og forklaringer

REF	Katalognummer	Udløbsdato	LOT	Lotnummer
	Ateranvänd ej			Bär före datum
	Producent			Lotnummer
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad			Se bruksanvisningen
EC REP	Auktoriserad representant i europeiska kommittén			

(sv) Oxygenmask, hög koncentration, icke-återändningsbar

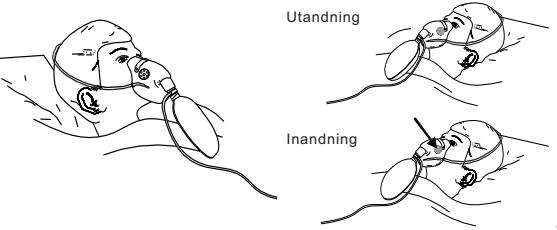

Beskrivning

Syrgasmask, hög koncentration, icke-återändningsmask. Engångsmask som kan användas som en högkoncentrations syrgasmask eller som en delvis genåndningsmask.

Syrgaslangen (om sådan medföljer) kan anslutas till syreflödesmätare med Fits-All-konnektoren utan extra adapter.

Kontraindikationer

Allvarlig Hyperoxi, Apne

Varningar

- Syre är i sig inte brandfarligt men kan självantändra. Använd inte i närheten av hög värme, öppen ild eller andra antändningskällor.
- Denna enhet är endast avsedd för engångsbruk och skal inte återanvändas. Återanvändning kan leda till ökat risk för infektion eller korskontaminering. Fysikaliska egenskaperna på produkten kanske inte längre är optimal för att hålla den avsedda användningen.
- Vid låg syrgas flödestasigheten kan resultatet bli för hög återandning av CO₂.
- Sterilisering eller bruk av rengöringsmedlet kan resultera i retention av skadelige restsubstanser.

- ⚠ Kontrollera att anslutningen är tät före användning. Kontrollera korrekt anslutning vid användning.


Bruksanvisning

- Packa upp och anslut till syrgastillförselen.
- Fyll reservoarpåsen helt före applicering.
- Placer masken över patientens ansikt och justera för bästa passform.
- Ställ in syretillförseln till en hastighet som förhindrar påsen från att helt kollapsa, när patienten inhalerar. Observera väska tillräcklig påfyllning. Observera att påsen fylls tillräckligt.
- För att använda masken som en delvis återändningsmask: Ta bortgummiskivorna på maskens sidor och undersida.

Symboler och förklaringar

REF	Artikelnummer	Bär före datum	LOT	Lotnummer
	Återanvänd ej			Bär före datum
	Producent			Lotnummer
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad			Se bruksanvisningen
EC REP	Auktoriserad representant i europeiska kommittén			

(no) Oksygenmaske, Høy koncentrasjon uten gjenånding

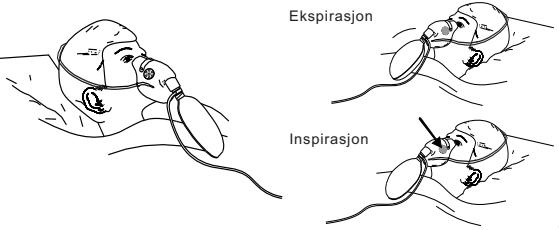

Beskrivelse