


ESTEEM®

Flex Convex


HOW TO USE THE UROSTOMY POUCH SOFT TAP

1 CLOSING THE POUCH

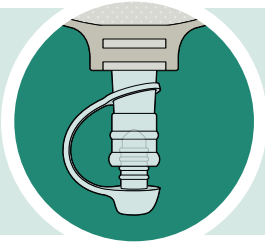


Step 1: Make sure the tap is securely closed.


2 DRAINING THE POUCH

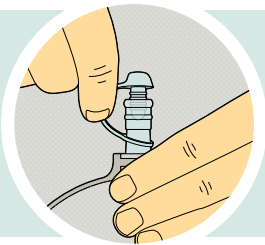

Step 1: Tilt tap up and towards you.

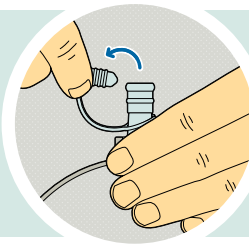


Step 2: Hold base of tap and open tap with the other hand.

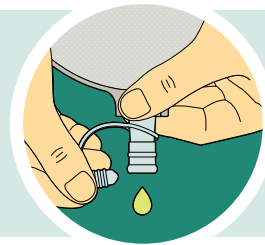


Step 3: Direct tap into toilet to drain the urine.

3 USING THE CONNECTOR WITH A NIGHT DRAINAGE BAG

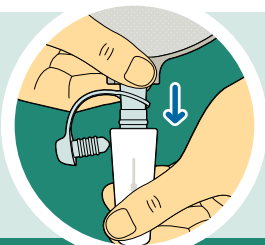

Step 1: Gently insert the ridged part of the end of the tap into the wider section of the adaptor with one hand while holding the base.

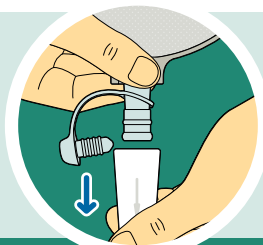

Step 2: To remove, pull out Connector with one hand while holding base of tap with the other hand.

To attach to a ConvaTec Night Drainage kit, **do not use the connector**. Instead, use the Universal adaptor included in the Night Drainage Kit (white tip to the night bottle tubing and clear tubing to tap on pouch).



For more information, please call our Customer Relations Center (Registered Nurses on staff) at **1-800-465-6302**, Monday through Friday, 8:00 AM to 6:00 PM (EST), or visit our Web Site at www.convatec.ca

Please refer to the package insert for complete instructions for use.

© indicate a trademark of ConvaTec Inc.
© 2018 ConvaTec Inc. AP-017083-MM

V1467




ESTEEM^{MD}

Flexible avec Convexité


MODE D'EMPLOI DE LA VALVE SOUPLE DU SAC POUR UROSTOMIE

1 FERMER LE SAC

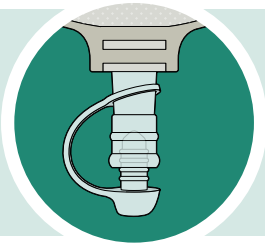


Étape 1 : S'assurer que la valve est bien fermée.


2 VIDER LE SAC

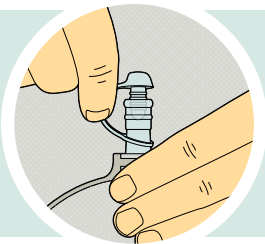

Étape 1 :
Relever la
valve vers le
haut (vers soi).

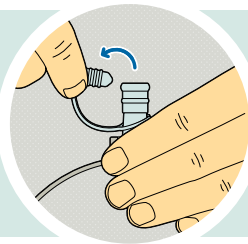


Étape 2 : Tenir la
base de la valve,
puis l'ouvrir avec
l'autre main.

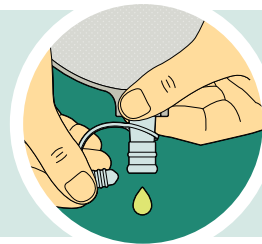


Étape 3 : Diriger
la valve vers la
toilette pour y
vider l'urine.

3 MODE D'EMPLOI DU CONNECTEUR POUR SACS DE NUIT

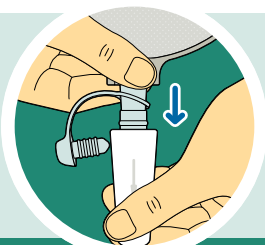

Étape 1 : Insérer délicatement la
section nervurée à l'extrémité de la
valve dans la section plus large de
l'adaptateur avec une main tout en
tenant la base de l'autre main.

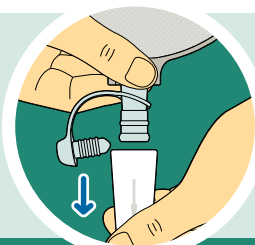

Étape 2 : Pour retirer le
connecteur, le tirer d'une main
tout en tenant la base de la
valve avec l'autre main.

Pour fixer le sac à la trousse pour drainage nocturne de ConvaTec, **ne pas utiliser le connecteur**.
Fixer plutôt l'adaptateur universel compris dans la trousse pour drainage nocturne (embout blanc dans le tube
du récipient et tube transparent directement sur la bonde souple du sac).



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre
Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel)
au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE)
ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.

MD indique une marque déposée de ConvaTec Inc.
© 2016 ConvaTec Inc. AP-017083-MM

V1467

