


ESTEEM®: SISTEMA DE 1 PIEZA


Colostomía

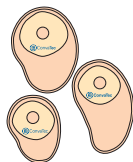

Producto	Medida	C.N.
Esteem® maxi cerrada opaca	Rec. 20 a 70mm	487660
Esteem® maxi cerrada transparente	Rec. 20 a 70mm	487678
Esteem® cerrada opaca	Rec. 20 a 70mm	487561
Esteem® cerrada opaca	30mm	487587
Esteem® cerrada opaca	35mm	492918
Esteem® cerrada opaca	40mm	487595
Esteem® cerrada opaca	50mm	487603
Esteem® cerrada transparente	Rec. 20 a 70mm	487611
Esteem® cerrada transparente	30mm	487637
Esteem® cerrada transparente	35mm	492926
Esteem® cerrada transparente	40mm	487645
Esteem® cerrada transparente	50mm	487652
Esteem® mini cerrada opaca	Rec. 20 a 70mm	487538

Presentación: 30 bolsas

Ileostomía

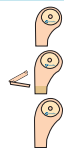


Producto	Medida	C.N.
Esteem® maxi abierta opaca	Rec. 20 a 70mm	489153
Esteem® maxi abierta transparente	Rec. 20 a 70mm	489146
Esteem® abierta opaca	Rec. 20 a 70mm	489096
Esteem® abierta opaca	25mm	489104
Esteem® abierta opaca	30mm	499112
Esteem® abierta opaca	40mm	489120
Esteem® abierta transparente	Rec. 20 a 70mm	489088

Presentación: 30 bolsas / 4 pinzas

ESTEEM synergy® : SISTEMA CON TECNOLOGÍA ACT (2 piezas sin aro)


Bolsas colostomía

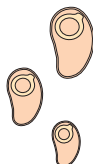

Producto	Medida	C.N.
Esteem synergy® maxi cerrada opaca	35mm	494104
Esteem synergy® maxi cerrada opaca	48mm	494112
Esteem synergy® maxi cerrada opaca	61mm	494120
Esteem synergy® maxi cerrada transparente	48mm	494146
Esteem synergy® maxi cerrada transparente	61mm	494153
Esteem synergy® cerrada opaca	35mm	494161
Esteem synergy® cerrada opaca	48mm	494179
Esteem synergy® cerrada opaca	61mm	494187
Esteem synergy® mini cerrada opaca	48mm	494203

Presentación: 30 bolsas

Bolsas ileostomía

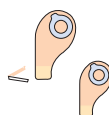


Producto	Medida	C.N.
Esteem synergy® maxi abierta opaca	35mm	494211
Esteem synergy® maxi abierta opaca	48mm	494229
Esteem synergy® maxi abierta opaca	61mm	494237
Esteem synergy® maxi abierta transparente	61mm	494260
Esteem synergy® abierta opaca	48mm	494286
Esteem synergy® extra grande transparente	89mm	1171686 (†)

(†) Presentación hospitalaria 30 bolsas. No dispensable por la Seguridad Social

Presentación: 30 bolsas + 4 pinzas

Apósitos

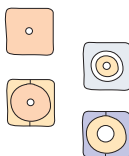

Producto	Medida	C.N.
Esteem synergy® Stomahesive® recortable	Rec. 13 a 35mm	494047
Esteem synergy® Stomahesive® recortable	Rec. 13 a 48mm	494054
Esteem synergy® Stomahesive® recortable	Rec. 13 a 61mm	494062
Esteem synergy® Stomahesive® recortable	Rec. 13 a 89mm	1171118 (†)
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable	Rec. 13 a 35mm	494070
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable	Rec. 13 a 48mm	494088
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible recortable	Rec. 13 a 61mm	494096
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	19/35mm	496190
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	25/35mm	496216
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	32/35mm	496232
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	35/35mm	496240
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	38/48mm	496257
Esteem synergy® Stomahesive® Flexible	45/48mm	496273
Esteem synergy® Convex moldeable	13 - 22/35mm	498964
Esteem synergy® Convex moldeable	22 - 33/48mm	498972
Esteem synergy® Convex moldeable	34 - 45/61mm	498980

(†) Presentación hospitalaria. No dispensable por la Seguridad Social

Presentación: 5 apósitos

ConvaTec Ostomy Care

CONVATEC
le proporciona
tres soluciones
pensadas para
ayudarle en el
cuidado de sus
pacientes



Esteem®



Esteem®
synergy

Tecnología
MOLDEABLE
ConvaTec™



Nuestro mundo es lo que hacemos de él™

ConvaTec



ConvaTec

Realize the possibilities™

Bibliografía: 1. Turnbull, G. Colwell, J.C. and Erwin-Toth, P. Quality of Life: Pre, Post, and Beyond Ostomy Surgery. OWM 2004-50 7A (Suppl. 1-12, 2, Perrett, T. McGrath A. Stoma Care, 1ª edición 97. Australia: Blackwell Publishing; 2005. 3. Killigback W, Sir Edward Hughes and colorectal surgery. Aust. N.Z. Surg. (2000) 70, 137-139. © y TM indican marcas de ConvaTec Inc. © 2008, ConvaTec Inc. AP-006061-ES Servicio de información de ConvaTec: infoTec 900304050. Para más información: www.convatec.us.es

Puntos importantes en el cuidado de un estoma⁽¹⁾:

- Garantizar una hermeticidad segura y fiable
- Proteger la piel periestomal
- Proveer bienestar al paciente

Seguridad y protección

Los hidrocoloides: diseñados para proporcionar adherencia y seguridad fiables


- Los hidrocoloides son materiales que absorben el agua, formando un gel y desarrollando propiedades que favorecen la fijación.
- Proporcionan un acoplamiento seguro al cuerpo, protegiendo y favoreciendo la regeneración de la piel.
- Mediante la combinación de polvos de hidrocoloide con un adhesivo (polímero elástico) se obtienen apósitos hidrocoloides idóneos para el cuidado de las ostomías.



Los apósitos hidrocoloides están diseñados para el uso en ambiente húmedo.



Pectina, gelatina y carboximetil celulosa sódica (NaCMC) son hidrocoloides utilizados en los apósitos de ConvaTec.

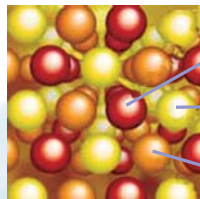

NaCMC

Pectina

Gelatina

Cuidado de las ostomías

Apósitos hidrocoloides


Protección de la piel periestomal

Contribuye a mejorar la calidad de vida

Los efluentes de un estoma pueden dañar la piel desprotegida⁽²⁾

La tecnología Stomahesive®: una eficaz protección cutánea

- Stomahesive® es el apósito hidrocoloide que constituye la base de la mayoría de los dispositivos de ostomía de ConvaTec desde hace más de 30 años.
- “Stomahesive® continúa siendo el mejor material para adherir sobre el abdomen del paciente⁽³⁾.”

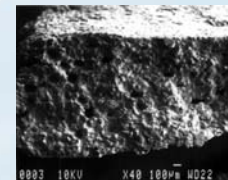

Tecnología Stomahesive® vista a través de microscopio electrónico.

Las ventajas de la Tecnología Stomahesive®:



- Asegura una excelente fijación tanto en medio seco como húmedo.
- Protege la piel periestomal.
- Favorece la regeneración de la piel dañada.
- Ofrece seguridad.
- Es fácil de utilizar para que el paciente ostomizado pueda valerse por sí mismo.

La tecnología Durahesive®: el efecto cuello de cisne

- La tecnología Durahesive® cuenta con la misma composición básica que la tecnología Stomahesive® e incorpora elastómeros que potencian la resistencia a los efluentes más irritantes.
- El efecto cuello de cisne: cuando el hidrocoloide entra en contacto con la humedad, la absorbe, aumentando su volumen y abrazando al estoma, lo que reduce el riesgo de fugas y aumenta la protección de la piel periestomal.

Las ventajas de la Tecnología Durahesive®:



- Proporciona cohesión y flexibilidad.
- Facilita una adherencia inmediata.
- Efecto “cuello de cisne” para aumentar la protección de la piel periestomal.

Discreción y confort

Esteem®



Esteem® es el dispositivo de una pieza que proporciona confort, seguridad y discreción en los diferentes momentos del día del paciente ostomizado.

Esteem® es fácil de aplicar y retirar.

La bolsa, con forma anatómica y fabricada en un material resistente y lavable, incorpora un filtro regulable que permite neutralizar y controlar la salida de gases.

El protector cutáneo acoplado a la bolsa, con **tecnología Stomahesive®** en su composición, proporciona un eficaz cuidado de la piel periestomal.

Las ventajas del sistema de 1 pieza Esteem®:

Esteem®




- Una eficaz protección cutánea gracias a la tecnología Stomahesive®.
- Comodidad para el uso diario.
- Fácil de aplicar y retirar.

Versatilidad y flexibilidad

Esteem synergy®

Esteem synergy® y la Tecnología de Acoplamiento Adhesivo (ACT) proporciona la solución ante el dilema de elegir entre los sistemas de 1 pieza o los sistemas tradicionales de 2 piezas.

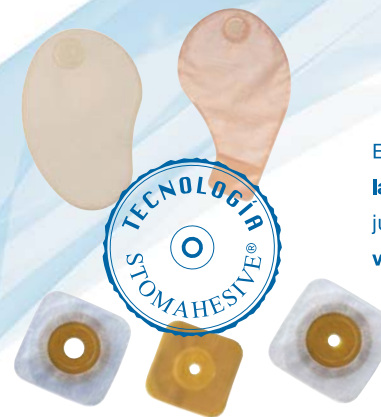

Esteem synergy® aúna en un mismo dispositivo **el confort, la simplicidad y la discreción** de los sistemas de 1 pieza, junto a **la seguridad, la protección cutánea y la versatilidad** de los sistemas de 2 piezas.

Las ventajas del sistema con Tecnología ACT de Esteem synergy®:

Esteem synergy®



- Discreción e intimidad para el paciente gracias a su bajo perfil, al haber eliminado la conexión mediante los rígidos y gruesos aros de plástico de los sistemas convencionales de 2 piezas.
- Fácil aplicación con mínima presión.
- Gran seguridad de sellado entre la bolsa y el protector cutáneo.


Todos los estomas no son iguales pero todos necesitan protección de la piel que los rodea

¿Podemos mejorar algo?


¡Sí, ConvaTec lo hizo!



Un nuevo concepto en el cuidado de ostomías, la **Tecnología MOLDEABLE de ConvaTec™**, que permite moldear con los dedos el protector cutáneo para ajustarlo al tamaño y forma adecuado de cada estoma.

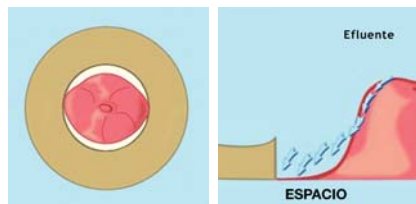

Apósito tradicional: no permite un ajuste óptimo, lo que puede comprometer la protección de la piel periestomal.

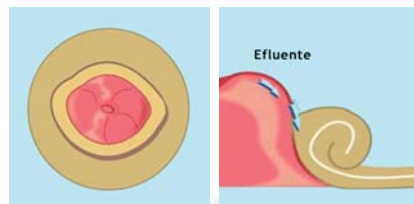



Apósito con Tecnología MOLDEABLE de ConvaTec™: minimiza el riesgo de contacto entre el efluente y la piel periestomal.

Adaptabilidad al estoma

Esteem synergy

Convex Moldeable

Indicado para pacientes con estomas difíciles de manejar

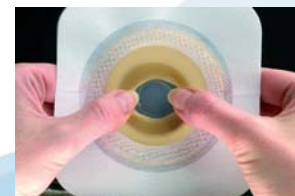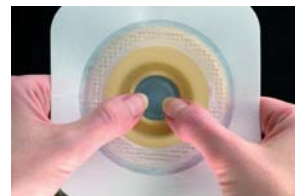

Esteem synergy® Convex Moldeable es un protector cutáneo convexo con **tecnología Durahesive®** en su parte central. Gracias a la **Tecnología MOLDEABLE de ConvaTec™** que incorpora en su composición, permite una adaptación muy buena al tamaño y forma del estoma, por lo que está indicado para pacientes con estomas difíciles de manejar. Sin necesidad de tijeras ni accesorios adicionales.



Y con todas las ventajas de la Tecnología ACT de Esteem synergy®

Las ventajas de la Tecnología MOLDEABLE de ConvaTec™:



- Simplifica la colocación del dispositivo, sin necesidad de tijeras.
- Permite una adaptación personalizada a la forma del estoma de cada paciente.
- Diseño único patentado que permite al paciente moldear y dar forma al apósito con los dedos.
- Facilita el proceso de aprendizaje en el manejo de una ostomía.

Las ventajas de Esteem synergy® Convex Moldeable:



- Fácil de moldear para conseguir una adaptación óptima.
- Facilita al paciente el manejo de su estoma.
- Ayuda a prevenir fugas y protege la piel adaptándose a la forma del estoma.
- Sin necesidad de tijeras.