



JEDNODIELNE KONVEXNÉ STOMICKÉ
UZAVRETÉ VRECKÁ **SOFT CONVEX**

Plne
hradené
zdravotnými
poistovňami

Základné príslušenstvo pre starostlivosť o stómiu

Ochranný film v spreji (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423288	30	F91153

Ochranný film obrúsky (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423282	1 (50 ml)	F91152

Odstraňovač náplastí sprej (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423289	1 (50 ml)	F91154

Obrúsky na odstraňovanie náplastí (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423281	30	F91155

Stomahesive™ ochranná pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
183910	60 g	1	F41229

Stomahesive™ ochranný zásyp

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
25535	25 g	1	F41228

Stomahesive™ adhezívna pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
129730	30 g	1	F41230

Pásky adhezívne Varimate Thin, hydrokoloidné, rovné

kód produktu	veľkosť	ŠÚKL kód
422148	5 × 11 cm	F2086A
422149	5 × 22 cm	F2087A

Pena čistiaca StomFoam®

veľkosť	ks	ŠÚKL kód
150 ml	1	F3555A

Pre bezplatné zaslanie vzorky produktu, prosím,
kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo písomne.



Eurotec

Ileomate

JEDNODIELNE KONVEXNÉ
STOMICKÉ VÝPUSTNÉ VRECKÁ
SOFT CONVEX



Referencie:

1. Správa z kontroly ID# 20170426P965, dátum skúšky 28.04.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
2. Správa o biologickom hodnotení, jednodielne mäkké konvexné stomické produkty. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
3. Certifikát analýzy ION M0015037, dátum skúšky 14.02.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
4. Analýza procesu ID# TP607505, dátum skúšky 13.12.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V



Zákaznícke centrum Convatec, Unomedical, s. r. o.,
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
Navštívte www.convatec.sk

@convatecslovensko

Soft Convex a Varimate sú produkty vyrábané spoločnosťou Eurotec BV,
Schotsbosenstraat 8, 4705 AG Roosendaal, Holandsko; StomFoam® sú produkty vyrábané
spoločnosťou ALP Ecology s. r. o., rantišky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

© 2022 Convatec.

™ označujú registrované ochranné známky a obchodné známky skupiny spoločností Convatec. Všetky ochranné známky
tretích strán (vrátane log a ikon), na ktoré Convatec odkazuje, zostávajú majetkom ich príslušných vlastníkov. AP-56972-SVK



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Pre viac informácií
nás kontaktujte
na bezplatnom čísle
zákazníckeho centra.

convatec
— forever caring —

www.convatec.sk

Eurotec

www.eurotec.nl

Jednodielne konvexné stomické výpustné vrecká SOFT CONVEX

ILEOMATE je jednodielny konvexný stomický systém výpustných vreciek. Lepiaca plocha je z mäkkého materiálu¹, ktorý je príjemný pre pokožku. Okrúhlu alebo oválnu konvexnú podložku je možné vystrihnúť do požadovaného tvaru a veľkosti. Je mäkká a konvexná, preto je určená na stómiu na úrovni alebo pod úrovňou pokožky² alebo v prípade, keď rovná podložka podteká. Otvor podložky je pružný a ľahko natiahovateľný. Vrecká majú kontrolné okienko a mäkký netkaný materiál z vonkajšej strany.

*stómia, ktorá je na úrovni kože, vtiahnutá alebo umiestnená v kožnom záhybe

Soft Convex stomický systém je vhodný na stómie, ktoré:

- sú umiestnené na úrovni kože alebo pod úrovňou kože;
- sú umiestnené v záhyboch kože;
- alebo kde by kvôli rovnaj podložke hrozilo podtekanie.




Vlastnosti podložky:

- ✓ Adhezívum šetrné k pokožke¹ s plnou hydrokoloidnou hrúbkou 0,9 mm, bez pridaných syntetických kaučukov, ktoré dokáže veľmi dobre absorbovať vlhkosť². Vďaka tomu podložka lepšie prilieha a pokožka zostane v dobrom stave aj v horúcom počasí alebo počas namáhavých aktivít.
- ✓ Adhezívum je určené na použitie na neporušenú pokožku a je možné ho aplikovať aj na citlivú alebo podráždenú pokožku.
- ✓ Mäkká penová vrchná vrstva a hladký konvexný (soft convex) tvar zaručujú, že toto adhezívum je pohodlné na nosenie.
- ✓ Strihanie nie je takmer nikdy potrebné, pretože otvor pre stómiu sa dá ľahko natiahnuť, v prípade, že je príliš malý alebo je stómia oválna. Rozťahovateľný otvor sa do stómie nezarezáva ani pri jej pohybe. Tlak mäkkej integrovanej vložky je vedený čo najbližšie k stómii pre lepší účinok. (obrázok 1)



Jedinečné vlastnosti výpustných vreciek:

- ✓ Lamelový filter s extra dlhou životnosťou; črevné plyny sa uvoľňujú automaticky bez zápachu³. (obrázok 2) Filter je štandardne vybavený filtračnou membránou Gore-Tex ktorá zabráňuje presiaknutiu obsahu zo stómie na odev⁴.
- ✓ Výpustné vrecko so špeciálnym uzáverom SOFTSAFE na suchý zips. Výpust 5-krát zahnete, krátko prstami zatlačte po celej ploche a vrecko je hermeticky uzatvorené.
- ✓ Praktické vrecko na prst („finger pocket“) slúži na jednoduché otvorenie a vyčistenie výpustu jednou rukou. (obrázok 4)
- ✓ Vrecko môžete skrútiť tak, že výpust ešte raz zahnete a schováte ho pod prednú časť vrecka. (obrázok 5)
- ✓ Běžové vrecko s kontrolným okienkom, ktoré uľahčuje aplikáciu na pokožku a umožňuje kontrolu stómie. (obrázok 3)

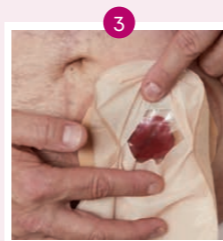

Výpustné vrecká Ileomate s konvexnou podložkou

Konvexná podložka pre stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou. Balené po 10 kusoch.

Veľké alebo extra veľké běžové s kontrolným okienkom.

Dĺžka vrecka: 20,5 cm.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2192A	ILTC 113-35	422078	L	13 - 35 mm	10	plná
F2193A	ILTC 113-44	422079	L	13 - 44 mm	10	plná
F2194A	IXLTC 113-54	422096	XL	13 - 54 mm	10	plná

Výpustné vrecká Ileomate s oválnou konvexnou podložkou

Oválna podložka pre oválnu stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou.

Extra veľké běžové s kontrolným okienkom.

Balené po 10 kusoch. Dĺžka (zatvoreného) vrecka: 20 cm.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2195A	ILTCO 113-54 (oval convex)	422077	XL, oválny tvar podložky	13 - 54 x 37 mm	10	plná

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Kolostómia (stómia na ľavej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
Ileostómia (stómia na pravej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek

www.convatec.sk
EuroTec, kde sa spájajú vedomosti so skúsenosťami!
www.eurotec.nl