



JEDNODIELNE KONVEXNÉ STOMICKÉ UZAVRETÉ VRECKÁ **SOFT CONVEX**

Plne
hradené
zdravotnými
poistovňami

ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE STAROSTLIVOSŤ O STÓMIU

Ochranný film v spreji (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423288	30	F91153



Ochranný film obrúsky (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423282	1 (50 ml)	F91152



Odstraňovač náplastí sprej (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423289	1 (50 ml)	F91154



Obrúsky na odstraňovanie náplastí (sting free) ESENTA™

kód produktu	ks v balení	ŠÚKL kód
423281	30	F91155



Stomahesive® ochranná pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
183910	60 g	1	F41229



Stomahesive® ochranný zásyp

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
25535	25 g	1	F41228



Stomahesive® adhezívna pasta

kód produktu	veľkosť	ks	ŠÚKL kód
129730	30 g	1	F41230



Pásy adhezívne Varimate Thin, hydrokoloidné, rovné

kód produktu	veľkosť	ŠÚKL kód
422148	5 × 11 cm	F2086A
422149	5 × 22 cm	F2087A



Pre bezplatné zaslanie vzorky produktu, prosím,
kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo písomne.



EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal
Holandsko
T 0165-551226
F 0165-541656
info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

Radim
bezplatná StomaLinka
0800 800 111 klub



Zákaznícke centrum ConvaTec,
Unomedical, s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra

bezplatná linka **0800 800 111**

Navštívte **www.convatec.sk**



@convatecslovensko

Referencie:

1. Správa z kontroly ID# 20170426P965, dátum skúšky 28.04.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
2. Správa o biologickom hodnotení, jednodielne mäkké konvexné stomické produkty. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V
3. Certifikát analýzy ION M0015037, dátum skúšky 14.02.2017. Údaje k dispozícii, EuroTec B.V
4. Analýza procesu ID# TP607505, dátum skúšky 13.12.2017. Údaje k dispozícii. EuroTec B.V

Ileomate

NOVINKA

JEDNODIELNE **KONVEXNÉ**
STOMICKÉ VÝPUSTNÉ VRECKÁ
SOFT CONVEX

Adhezívna
hmota podložky
je vyrobená zo
100%
HYDROKOLOIDU



www.convatec.sk

www.eurotec.nl

JEDNODIELNE KONVEXNÉ STOMICKÉ VÝPUSTNÉ VRECKÁ
SOFT CONVEX

ILEOMATE je jednodielny konvexný stomický systém výpustných vreciek. Lepiaca plocha je z mäkkého materiálu¹, ktorý je príjemný pre pokožku. Okrúhlu alebo oválnu konvexnú podložku je možné vystrihnúť do požadovaného tvaru a veľkosti. Je mäkká a konvexná, preto je určená na stómiu na úrovni alebo pod úrovňou pokožky* alebo v prípade, keď rovná podložka podteká. Otvor podložky je pružný a ľahko naťahovateľný. Vrecká majú kontrolné okienko a mäkký netkaný materiál z vonkajšej strany.

*stómia, ktorá je na úrovni kože, vtiahnutá alebo umiestnená v kožnom záhybe

Soft Convex stomický systém je vhodný na stómie, ktoré:

- sú umiestnené na úrovni kože alebo pod úrovňou kože;
- sú umiestnené v záhyboch kože;
- alebo kde by kvôli rovnnej podložke hrozilo podtekание.




VLASTNOSTI PODLOŽKY

- ✓ Adhezívum šetrné k pokožke¹ s plnou hydrokoloidnou hrúbkou 0,9 mm, bez pridaných syntetických kaučukov, ktoré dokáže veľmi dobre absorbovať vlhkosť². Vďaka tomu podložka lepšie prilne a pokožka zostane v dobrom stave aj v horúcom počasí alebo počas namáhavých aktivít.
- ✓ Adhezívum je určené na použitie na neporušenú pokožku a je možné ho aplikovať aj na citlivú alebo podráždenú pokožku.
- ✓ Mäkká penová vrchná vrstva a hladký konvexný (soft convex) tvar zaručujú, že toto adhezívum je pohodlné na nosenie.



JEDINEČNÉ VLASTNOSTI VÝPUSTNÝCH VRECIK:

- ✓ Lamelový filter s extra dlhou životnosťou; črevné plyny sa uvoľňujú automaticky bez zápachu³. [obrázok 2] Filter je štandardne vybavený filtračnou membránou Gore-Tex ktorá zabraňuje presiaknutiu obsahu zo stómie na odev⁴.
- ✓ Běžové vrecko s kontrolným okienkom, ktoré uľahčuje aplikáciu na pokožku a umožňuje kontrolu stómie. [obrázok 3]
- ✓ Výpustné vrecko so špeciálnym uzáverom SOFTSAFE na suchý zips. Výpust 5-krát zahnete, krátko prstami zatlačte po celej ploche a vrecko je hermeticky uzatvorené.
- ✓ Praktické vrecko na prst („finger pocket“) slúži na jednoduché otvorenie a vyčistenie výpustu jednou rukou. [obrázok 4]
- ✓ Vrecko môžete skrátiť tak, že výpust ešte raz zahnete a schováte ho pod prednú časť vrecka. [obrázok 5]

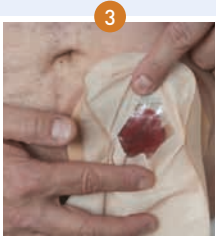

VÝPUSTNÉ VRECKÁ ILEOMATE
S KONVEXNOU PODLOŽKOU

Konvexná podložka pre stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou. Balené po 10 kusoch.

VEĽKÉ ALEBO EXTRA VEĽKÉ BÉŽOVÉ
S KONTROLNÝM OKIENKOM
Dĺžka (zatvoreného) vrecka: 20 cm.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2192A	ILTC 113-35	422078	L	13 – 35 mm	10	plná
F2193A	ILTC 113-44	422079	L	13 – 44 mm	10	plná
F2194A	IXLTC 113-54	422096	XL	13 – 54 mm	10	plná

VÝPUSTNÉ VRECKÁ ILEOMATE
S OVÁLNOU KONVEXNOU PODLOŽKOU

Oválna podložka pre oválnu stómiu na úrovni pokožky alebo pod ňou.

EXTRA VEĽKÉ BÉŽOVÉ S KONTROLNÝM OKIENKOM.
Balené po 10 kusoch. Dĺžka (zatvoreného) vrecka: 20 cm.



ŠÚKL kód	EuroTec kód	ICC kód	veľkosť vrecka	veľkosť podložky	počet ks v balení	úhrada ZP
F2195A	ILTCO 113-54 (oval convex)	422077	XL, oválny tvar podložky	13 – 54 x 37 mm	10	plná

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac

Kolostómia (stómia na ľavej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
Ileostómia (stómia na pravej strane)	
Jednodielny systém/ jednodielny systém konvexný	90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek