




Unomedical 100% Silikon Foley Kateter

En forbedret og utvidet portefølje for Unomedical Silicone Foley-kateter, gir pasienter og helsepersonell et bredt spekter av løsninger for pålitelig og komfortabel akutt eller langsiktig urinavledning.

Funksjonelt design

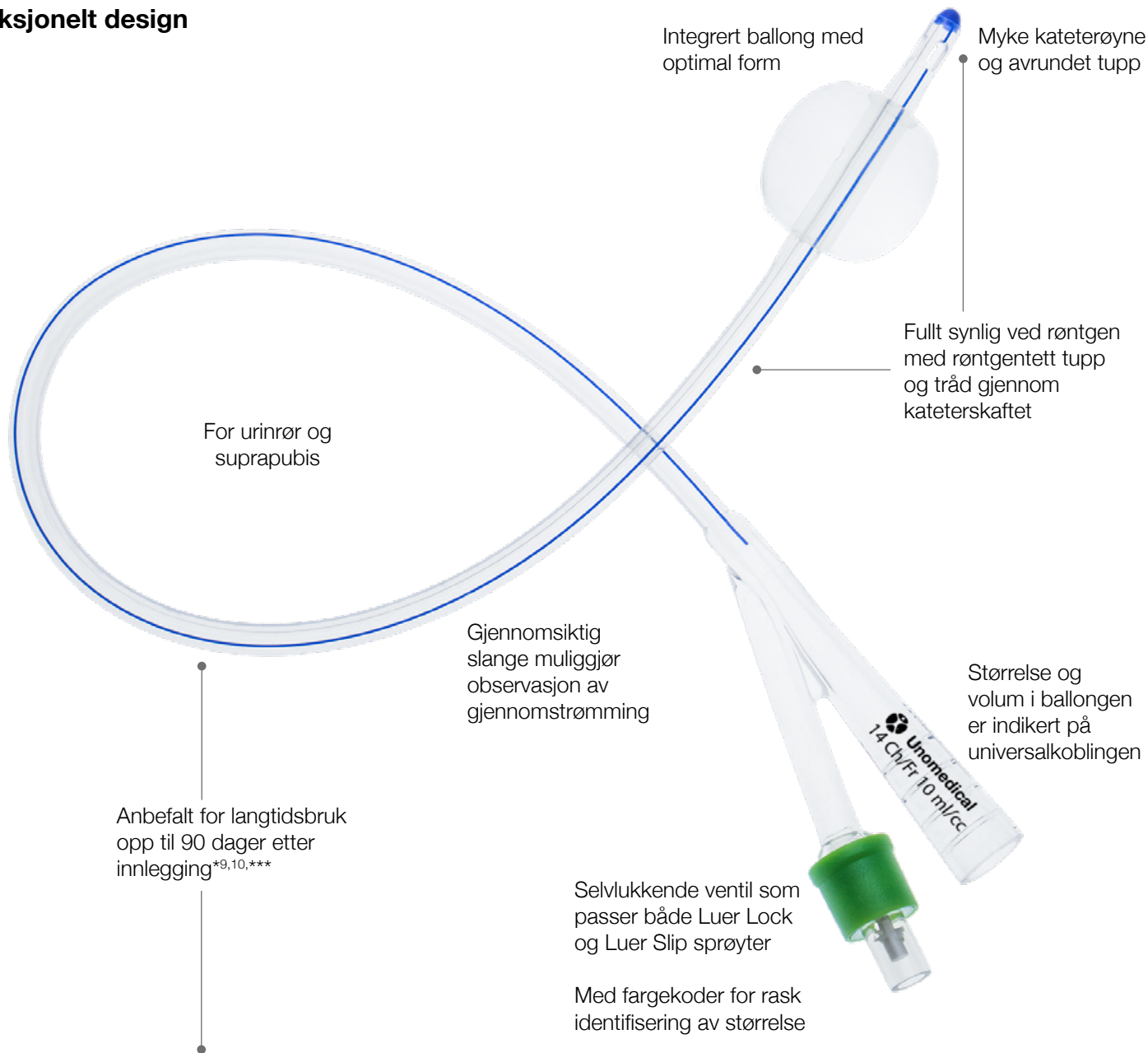

Silikon - ideelt materiale for langtidsbruk

Silikon er et svært fleksibelt og sterkt materiale, ment for pålitelig passasje og designet for å legge til rette for komfort ved langtidskateterisering. Den glatte og myke overflaten er med på å forhindre avleiringer eller irritasjon i urinrøret. ^{*1,2,3,4}

Med mulighet for å evaluere innholdet i kateteret, vil man også kunne vurdere når et kateterskifte er nødvendig.

Silikonkatetre har et større innvendig lumen i selve slangen, slik at det kan håndtere en større mengde urin sammenlignet med tradisjonelle inneliggende katetre. Dette kan forbedre hastigheten på gjennomstrømmingen og lette passasjen for blodkoagler.



Typisk tverrsnitt av et latekskateter



Typisk tverrsnitt av et silikonkateter

^{**} Kan brukes som suprapubisk skiftekateter. Gjelder med Nelaton tupp kateter med 10 ml ballong CH/FG 12-18.


^{***} 2-veis kateter til voksne kan ligge inne i opp til 90 dager.

Produktutvalg



Tiemann Tupp

En myk, fleksibel, bøyd tupp, designet til å forenkle kateterisering i tilfeller der forstørret prostata eller andre utfordringer vanskeliggjør kateterisering.

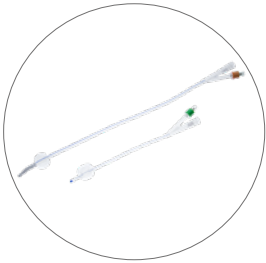

Kortere lengde på kateteret, mer beilelig for kvinnelige brukere



Pediatrisk

Tilpasset anatomien hos barn med 31 cm lengde og ballong størrelser mellom 1.5 and 5.0 ml for å forenkle innsettingen.




3-veis kateter


For postoperativ drenasje med tilleggsskanal for irrigasjon av blæren. Utstyrt med en 30 ml ballong for å bidra til å hemme blødning.



Careline™ katetersett med prefylte sprøyter som inneholder en oppløsning med 10% glyserin i vann.

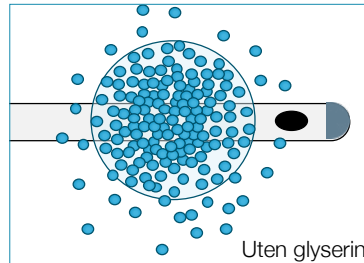

Uten glyserin

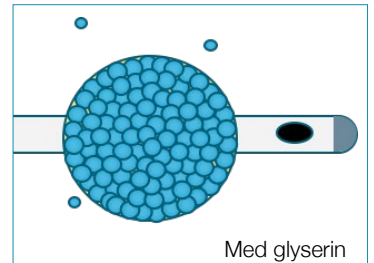

Med glyserin

Unomedical CARELINE™ katetersett leveres med en prefylt sprøyte med 10% vandig glyserinoppløsning i pakningen.

Silikon er mer gjennomtrengelig enn gummi, og rent vann vil gradvis diffundere ut gjennom veggen i ballongen. Mer enn 50% kan gå tapt i løpet av kateterets liggetid, og det kan øke risikoen for at kateteret glir ut eller legger seg feil i blæren. Glyserinløsninger vil ikke diffundere gjennom veggen på ballongen på samme måte, hvilket gjør at ballongen evner å holde volumet stabilt over en lengre periode.

*5,6,7,8,10

- Kateteret ligger sikkert med minimal risiko for at det vil løsne
- Ikke samme behov for å etterfylle ballongen

Med hvert CARELINE™ katetersett følger en 10 ml tom sprøyte for å forenkle tømningen av ballongen ved fjerning av kateteret.

Kateter med temperatursensor



Serie 400 kompatibelt støpsel med ergonomisk grep

Unomedical's Foley kateter med temperatursensor har en innebygget temperaturmåler for nøyaktig måling av kjernetemperatur i blæren.

- Temperatursensor med målenøyaktighet på $\pm 0.2/-0.2^{\circ}\text{C}$ i området $25-45^{\circ}\text{C}$ *11
- Kompatibel med Serie 400 monitorsystemer
- Tilgjengelig i voksen og pediatriske størrelser


* Som vist in vitro



Katetersett med prefylt sprøyte som inneholder en oppløsning med 10% glyserin, for sykehus og hjemmebruk

		REF	Norsk varenr.	CH/FG	Lengde	Kanaler	Volum ballong	Design tupp	Langtids	Antall (enheter)
5x		CARELINE™ 2-veis, 10 ml, Nelaton tupp med prefylt sprøyte med 10% glyserinoppløsning, tom sprøyte, merkelapper til pasient								
		UM41151210P	938305	12	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41151410P	997865	14	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41151610P	870272	16	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41151810P	872269	18	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41152010P	909206	20	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41152210P	843041	22	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41152410P	862387	24	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
5x		CARELINE™ KVINNEKATETER 2-veis, 10 ml, nelaton tupp med prefylt sprøyte med 10% glyserinoppløsning, tom sprøyte, merkelapper til pasient								
		UM41171210P	983350	12	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41171410P	831462	14	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41171610P	897211	16	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41171810P	942025	18	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41172010P	960077	20	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41172210P	805559	22	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
		UM41172410P	838021	24	24 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	5/250
5x		CARELINE™ 2-veis, 10 ml, TIEMANN tupp med prefylt sprøyte med 10% glyserinoppløsning, tom sprøyte, merkelapper til pasient								
		UM41161210P	819772	12	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41161410P	999154	14	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41161610P	931583	16	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41161810P	906751	18	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41162010P	985425	20	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41162210P	836603	22	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
		UM41162410P	940966	24	42 cm	2-veis	10 ml	Tiemann	Ja	5/250
1x		CARELINE™ 10ml Glyserin-sprøyte								
		UM45000010	994876	-	-	-	10 ml	-	-	1/30

Unomedical 100% Silikon Foley Kateter

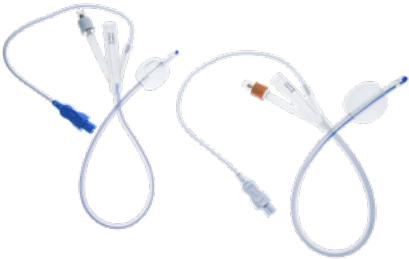	REF	Norsk varenr.	CH/FG	Lengde	Kanaler	Volum ballong	Tupp	Langtids	Antall (pk)
	2-veis, 10 ml, Nelaton tupp								Salgsenhet: 10 stk
	UM41151210	897005	12	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41151410	828399	14	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41151610	975240	16	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41151810	960426	18	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41152010	933256	20	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41152210	859069	22	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41152410	970006	24	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	UM41152610	933282	26	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	Ja	10/200
	2-veis, 30 ml, Nelaton tupp								Salgsenhet: 5 stk
	UM41151630	950654	16	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	UM41151830	912830	18	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	UM41152030	932071	20	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	UM41152230	844132	22	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	UM41152430	987074	24	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	UM41152630	973550	26	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	Ja	5/250
	Pediatrike 2-veis, Nelaton tupp Leveres med nylon-mandreg								Salgsenhet: 5 stk
	UM43150601	958262	6	31 cm	2-veis	1.5 ml	Nelaton	-	5/250
	UM43150803	984599	8	31 cm	2-veis	3 ml	Nelaton	-	5/250
	UM43151005	962274	10	31 cm	2-veis	5 ml	Nelaton	-	5/250
	3-veis, 30 ml, Nelaton tupp								Salgsenhet: 5 stk
	UM45151830	896097	18	40 cm	3-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM45152030	976275	20	40 cm	3-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM45152230	977476	22	40 cm	3-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM45152430	932250	24	40 cm	3-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	Temperatursensor, Pediatrik/Voksen, 2-veis, Nelaton tupp								Salgsenhet: 5 stk
	UM42220803		08	31 cm	2-veis	3 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42221005		10	31 cm	2-veis	5 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42221210		12	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42221410		14	40 cm	2-veis	10 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42221630		16	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42221830		18	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42222030		20	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42222230		22	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250
	UM42222430		24	40 cm	2-veis	30 ml	Nelaton	-	5/250


Referanser: **1** Nacey JN, Tulloch AGS, Ferguson AF. Catheter-induced Urethritis: A Comparison Between Latex and Silicone Catheters in a Prospective Clinical Trial. British Journal of Urology 1985;57:325-328; **2** HUANG et al. Effect of silicon and latex urinary catheters: a comparative study, 2005; **3** Tunney MM, Keane PF, Gorman SP. Assessment of urinary tract biomaterial encrustation using a modified Robbins device continuous flow model. J Biomed Mater Res. 1997;38(2):8; **4** Morris NS, Stickler DJ, Winters C. Which indwelling urethral catheters resist encrustation by Proteus mirabilis biofilms? British Journal of Urology 1997;80,58-6; **5** Studer UE, Bishop MC, Zingg EJ. How to fill silicone catheter balloon. Urology. 1983 Sep;22(3):300-2; **6** JoAnn Mercer Smith, BSN, RN, CWOCN, Indwelling Catheter Management: From Habit-based to Evidence-based Practice, Ostomy Wound Manage. 2003;49(12):34-45; **7** D. K. Ackerman, Praktische Hinweise zur Einlage des Blasenkatheters, Schweiz Med Forum Nr. 27 3. Juli 2002; **8** Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care Catheterisation - Indwelling catheters in adults Urethral and Suprapubic, European Association of Urology Nurses 2012; **9** Well Lead Long-term indwelling silicone foley catheter test report. 2015. In vitro test report. Copy on file at ConvaTec; **10** Test report for 10% glycerin solution. 2017. Welllead. In vitro test report. Copy on file at ConvaTec; **11** Test report on Temperature sensors. TÜVRheinland. 2015. In vitro test report. Copy on file at ConvaTec.





Silikon er et optimalt materialet til bruk ved både korttids- og langtidskateterisering. Det er med på å redusere risikoen for irritasjon i urinrøret^{*1,2,3,4} samtidig som det er fleksibelt og solid. Produktet er ment for å holde passasjen åpen samtidig som det skal være så komfortabelt som mulig. Stor indre lumen tillater stor og hurtig drenasje.

Alle Unomedical langtids katetere er anbefalt for bruk opp til 90 dager⁹.

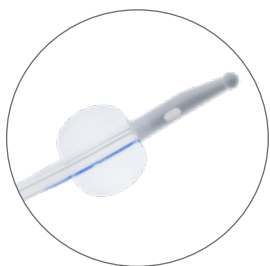

Unomedical sin portefølje av silikon foleykateter tilbyr både pasienter og helsepersonell et bredt spekter av løsninger, som imøtekommer krav til pålitelig korttids- og langtidskateterisering:

- Nelaton tupp kateter
- Tiemann tupp
- Kvinnekateter
- 10 og 30 ml ballong
- Pediatriske kateter
- 3-veis kateter for irrigasjon av blæren
- Kateter med sensor for temperaturmåling



Alle langtidskateter er tilgjengelig som CARELINE™ katetersett, og inneholder en pre-fylt sprøyte med 10% vann/glysering løsning og en sprøyte for å trekke ut innholdet. Alle produkter er utstyrt med selvklebende merkelapper.



Alle Unomedical 100% Silikon Foley kateter har et funksjonelt og gjennomtenkt design.

- Fullt synlig ved røntgen med røntgentett tupp og tråd gjennom kateteret
- Geometrisk design på ballongen
- Gjennomsiktig slange for å kunne observere gjennomstrømming av urin
- Integrert ballong
- For bruk via suprapubis eller urinrør
- Selvlukkende ventil med fargekode



Alle kateter er uten lateks, naturgummi-allergener og eftalater, som BIS(2-ethylexyl) eftalat (DEHP).

**For ytterligere informasjon vedrørende produkter, kontakt oss på kundservice:
convatec.kundeservice@convatec.com eller på telefon: 800 30 995.**

Med forbehold om skrivefeil, endringer eller oppdateringer i produktspesifikasjoner.