

Kód produktu	Doplňok	ŠÚKL kód
423607	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7949A
423608	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7950A
423609	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7951A
423624	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7952A
423625	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7953A
423626	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7954A
423627	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7955A
423642	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7956A
423643	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7957A
423644	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7958A
423645	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7959A
423651	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V0/10 - 55 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7960A
423652	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7962A
423653	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7963A
423654	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7964A
423655	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7965A
423656	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7966A
423657	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7967A
423658	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7968A
423664	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7969A
423665	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7970A
423666	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7971A
423667	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7972A

Kód produktu	Doplňok	ŠÚKL kód
423668	uzavreté, hĺbka 4 mm, V0/10-55 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7973A
423669	uzavreté, hĺbka 4 mm, V1/10-45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7974A
423670	uzavreté, hĺbka 4 mm, V2/10-35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7975A
423672	uzavreté, hĺbka 7 mm, V0/10-55 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7976A
423673	uzavreté, hĺbka 7 mm, V1/10-45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7977A
423674	uzavreté, hĺbka 7 mm, V2/10-35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 30 ks	F7978A
423676	uzavreté, hĺbka 4 mm, V0/10-55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7979A
423677	uzavreté, hĺbka 4 mm, V1/10-45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7980A
423678	uzavreté, hĺbka 4 mm, V2/10-35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7981A
423679	uzavreté, hĺbka 4 mm, V3/10-25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7982A
423689	uzavreté, hĺbka 7 mm, V0/10-55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7996A
423690	uzavreté, hĺbka 7 mm, V1/10-45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7997A
423691	uzavreté, hĺbka 7 mm, V2/10-35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7998A
423692	uzavreté, hĺbka 7 mm, V3/10-25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 30 ks	F7999A

Kolostómia (stómia na ľavej strane)	
Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek/mesiac
Ileostómia (stómia na pravej strane)	
Jednodielný systém/jednodielný systém konvexný	90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek/mesiac



NOVINKA

Esteem Body™ je mäkký (soft) konvexný jednodielny stomický systém s technológiou Leak Defense™ – s ochranou pred podtekaním. Naše špičkové adhezíva v spojení so širokým výberom konvexity sú navrhnuté tak, aby sa prispôbili telu, a tým zabezpečili dlhotrvajúce a bezpečné tesnenie.



1

Špičkové adhezíva
tvoria bariéru
a chránia pokožku.



Kombinácia hĺbky
a šírky konvexity
zabezpečuje správnu
aplikáciu od začiatku.

2

Adhezívne hmoty

**Navrhnuté sú tak, aby sa predchádzalo podráždeniu
pokožky v okolí stómie.**

Spoločnosť Convatec spôsobila revolúciu
v starostlivosti o stómiu vývojom hydrokoloidov.
Naše špičkové adhezíva vytvárajú bariéru a chránia
pokožku. Sú navrhnuté a vytvorené tak,
aby ľuďom so stómiou hneď od začiatku zabezpečili
správnu aplikáciu.



**Pomôcky Esteem Body™ sú vyrobené z hmoty Durahesive™
a modifikovanej hmoty Stomahesive™**

Máte tekutý alebo polotekutý
obsah odchádzajúci zo stómie?

Zvoľte si hmotu Durahesive™.

Pri styku s tekutinou nabobtná
a vytvorí tzv. „korytnačí“
golier, čím sa dosiahne tesné
obomknutie stómie, čím
sa zabráni podtekaniu pod
pomôcku. Predĺži sa tým čas
použitia pomôcky.



Máte čiastočne formovanú
alebo formovanú stolicu?

**Vyskúšajte modifikovanú
hmotu Stomahesive™.**

Ideálna pre stomikov s čiastočne
formovanou alebo formovanou
stolicou. Hmota dokonale
priľne k suchej aj vlhkej pokožke
a obsahuje stopové množstvo
minerálneho oleja, vďaka
ktorému je podložka pružnejšia
a ľahšie sa odstraňuje.



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Viac informácií na bezplatnom čísle
zákazníckeho centra 0800 800 111
Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931 alebo nám napíšte email na
stomalinka@convatec.com

www.convatec.com/sk-sk

© 2025 Convatec Inc.™ označuje obchodné známky spoločnosti Convatec.
AP-63687-SVK-SLO-v1 (v1.0)

*Vrecká v tvare čísla 8 sú k dispozícii vo forme výpustných a uzavretých vreciek.


Referencie: 1. McNichol L, Cobb T, Depaifve Y, Quigley M, Smitka K, Gray, M. Characteristics of
Convex Skin Barriers and Clinical Application: Results of an International Consensus Panel.
J Wound Ostomy Continence Nurs. 2021;48(6):524-532

Konvexné pomôcky

Mäkké (soft) konvexné pomôcky vo viacerých variantoch.

Adhezívne podložky sú dostupné v rôznych variantoch, pre rôzne tvary tela a typy stómie.
Identifikovanie 5 kľúčových charakteristík konvexnosti umožňuje zdravotníkom vybrať
najvhodnejšiu konvexnú podložku pre ich pacienta.

5 charakteristík konvexnosti¹

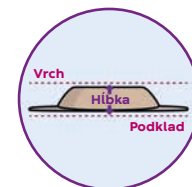

Hĺbka

Je to vzdialenosť
od vrcholu
podložky k jej
základni.



Stlačiteľnosť

Schopnosť
konvexnej
časti podložky
vytlačiť sa alebo
narovnať sa.



Flexibilita

Schopnosť
konvexnej
podložky
ohnúť sa.





Miesto napätia

Je to miesto napätia,
v ktorom podložka
vytvára tlak smerom
nadol a von na
peristomálnu
topografiu.



Sklon


Je to uhol od
spodnej časti
konvexnej
podložky k jej
vrcholu.

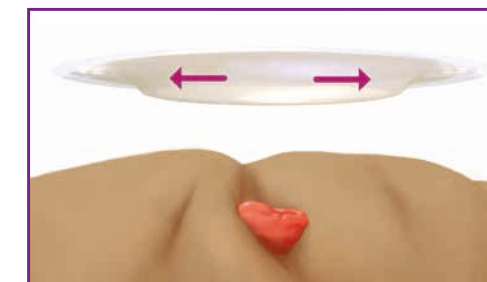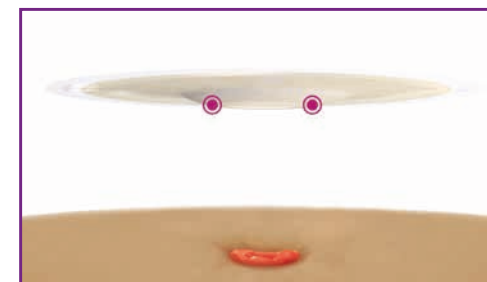

Hĺbka miesta napätia umožňuje stomickým konvexným podložkám:

**Prispôbiť sa stómii na úrovni
kože alebo vpadnutej stómii,** aby sa
zabezpečil tlak na kožu, čo najbližšie
k stómii, ak je potrebné, aby stómia
vyčnievala.

**Vyrovnať záhyby v okolí stómie
na peristomálnej pokožke** pomocou
tlaku smerom od stómie, ktoré môžu
brániť dosiahnutiu konzistentného
a spoľahlivého utesnenia.

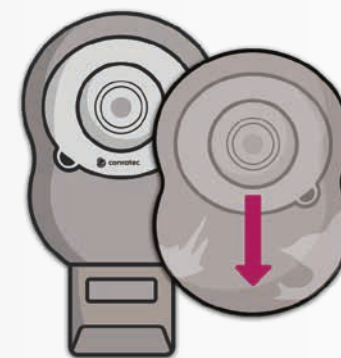

**Dizajn v tvare čísla 8
pre ileostomikov
a kolostomikov**

Dizajn vrecka

**Moderné vrecko navrhnuté pre ľudí
so stómiou.**

- ✓ Moderný vzhľad vrecka v tvare čísla osem pre ileostomikov
a kolostomikov zaisťuje jeho menšie previsanie počas
naplnenia.*
- ✓ Vrecko je navrhnuté tak, aby bolo vizuálne diskkrétne
aj pod bielym oblečením.
- ✓ Tkanina skryje obsah vrecka, aj keď je mokrá.
- ✓ Tkanina vrecka je vodoodolná.