

Esteem Body™ výpustné vrečko

Kód produktu	Názov	Doplnok	ŠÚKL kód
423607	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7949A
423608	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7950A
423609	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7951A
423624	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7952A
423625	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7953A
423626	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7954A
423627	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, štandard, 10 ks	F7955A
423642	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7956A
423643	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7957A
423644	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7958A
423645	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7959A
423651	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V0/10 - 55 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7960A
423652	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V1/10 - 45 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7962A
423653	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V2/10 - 35 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7963A
423654	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 3,5 mm, V3/10 - 25 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7964A
423655	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7965A
423656	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7966A
423657	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7967A
423658	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, šedé, s okienkom, veľké, 10 ks	F7968A
423664	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V0/10 - 55 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7969A
423665	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V1/10 - 45 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7970A
423666	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V2/10 - 35 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7971A
423667	Vrečko stomické jednodielne Esteem Body™ Soft Convex s Leak Defense™ technológiou	výpustné, hĺbka 7 mm, V3/10 - 25 mm, priehľadné, veľké, 10 ks	F7972A

Množstvomý limit na 1 mesiac:

Kolostómia (stómia na ľavej strane)		
Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný	90 ks výpustných vreciek/mesiac	
Ileostómia (stómia na pravej strane)		
Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný	90 ks výpustných vreciek/mesiac	

- Dostupné v priehľadnom aj nepriehľadnom prevedení s okienkom
- Vystrihovateľný
- Hĺbka konvexnej podložky 3,5 mm a 7 mm
- Veľkosť štandard a veľké
- Diskrétna teplá šedá farba
- Hmota Durahesive™

*Vrecká v tvare čísla 8 sú k dispozícii vo forme výpustných vreciek.

1. McNichol L, Cobb T, Depaifve Y, Quigley M, Smitka K, Gray, M. Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application: Results of an International Consensus Panel. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2021;48(6):524-532



zákaznícka linka
convatec
0800 800 111
pre volajúceho zadarmo

Viac informácií na bezplatnom čísle
zákazníckeho centra 0800 800 111
Zákaznícke centrum Convatec
Unomedical, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931 alebo nám napíšte email na
stomalinka@convatec.com

www.convatec.sk

© 2025 Convatec Inc.™ označuje obchodné známky spoločnosti Convatec.
AP-63687-SVK-SLO-v1 (v1.0)



convatec



Plne hrazené všetkými
zdravotnými poisťovňami

Problém s podtekaním?

Vyriešený.



NOVINKA

Jednodielny stomický systém


EsteemBody™

s technológiou Leak Defense™
- s ochranou pred podtekaním

Esteem Body™ je mäkký (soft) konvexný jednodielny stomický systém s technológiou Leak Defense™ - s ochranou pred podtekaním. Naše špičkové adhezíva v spojení so širokým výberom konvexity sú navrhnuté tak, aby sa prispôbili telu, a tým zabezpečili dlhotrvajúce a bezpečné tesnenie.



Sme priekopníci v oblasti hydrokoloidov, a preto sú naše adhezíva vytvorené tak, aby pomohli ľuďom so stómiou aplikovať stomický systém spoľahlivo a správne zakaždým a na prvýkrát.

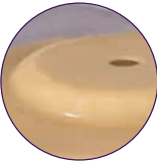

Vďaka kombinácii hĺbky a šírky konvexity sa stomický systém prispôbi telesným krivkám a typu stómie.



Moderný vzhľad vrečka v tvare osmičky zabezpečuje jeho menšie prevísanie pri naplnení.*

EsteemBody™

s technológiou Leak Defense™
- s ochranou pred podtekaním

1

Špičkové adhezíva
tvoria bariéru
a chránia pokožku.



Kombinácia hĺbky
a šírky konvexity
zabezpečuje správnu
aplikáciu od začiatku.

2

Adhezívne hmoty

Navrhnuté sú tak, aby sa predchádzalo podráždeniu
pokožky v okolí stómie.

Spoločnosť Convatec spôsobila revolúciu
v starostlivosti o stómiu vývojom hydrokoloidov.
Naše špičkové adhezíva vytvárajú bariéru a chránia
pokožku. Sú navrhnuté a vytvorené tak,
aby ľuďom so stómiou hneď od začiatku zabezpečili
správnu aplikáciu.



Jednodielne stomické vrečko Esteem Body™ soft convex s Leak Defense™
technológiou, výpustné - s hmotou Durahesive™.



Máte tekutý alebo polotekutý
obsah odchádzajúci zo stómie?

Zvoľte si hmotu Durahesive™.


Pri styku s tekutinou nabobtná
a vytvorí tzv. „korytnačí“ golier,
čím sa dosiahne tesné obomknutie
stómie, čím sa zabráni podtekaniu
pod pomôcku. Predĺži sa tým čas
použitia pomôcky.

Konvexné pomôcky

Mäkké (soft) konvexné pomôcky vo viacerých variantoch.

Adhezívne podložky sú dostupné v rôznych variantoch, pre rôzne tvary tela a typy stómie.
Identifikovanie 5 kľúčových charakteristík konvexnosti umožňuje zdravotníkom vybrať
najvhodnejšiu konvexnú podložku pre ich pacienta.

5 charakteristík konvexnosti¹

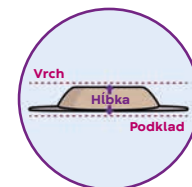

Hĺbka

Je to vzdialenosť
od vrcholu
podložky k jej
základni.



Stlačiteľnosť

Schopnosť
konvexnej
časti podložky
vytlačiť sa alebo
narovnať sa.



Flexibilita

Schopnosť
konvexnej
podložky
ohnúť sa.





Miesto napätia

Je to miesto napätia,
v ktorom podložka
vytvára tlak smerom
nadol a von na
peristomálnu
topografiu.



Sklon

Je to uhol od
spodnej časti
konvexnej
podložky k jej
vrcholu.

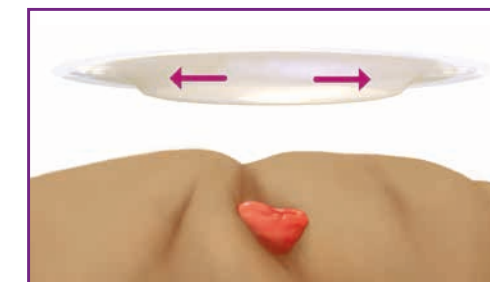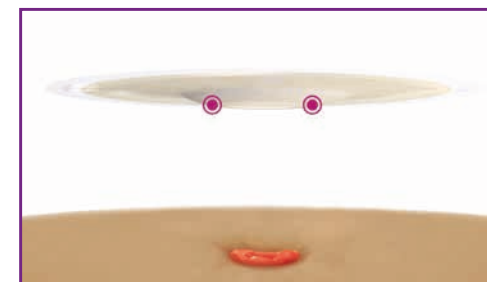

Hĺbka miesta napätia umožňuje stomickým konvexným podložkám:

**Prispôbiť sa stómii na úrovni
kože alebo vpadnutej stómii,** aby sa
zabezpečil tlak na kožu, čo najbližšie
k stómii, ak je potrebné, aby stómia
vyčnievala.

**Vyrovnáť záhyby v okolí stómie
na peristomálnej pokožke** pomocou
tlaku smerom od stómie, ktoré môžu
brániť dosiahnutiu konzistentného
a spoľahlivého utesnenia.



Dizajn v tvare čísla 8
pre ileostomikov
a kolostomikov

Dizajn vrečka

**Moderné vrečko navrhnuté pre ľudí
so stómiou.**

- ✓ Moderný vzhľad vrečka v tvare čísla osem pre ileostomikov a kolostomikov zaisťuje jeho menšie prevísanie počas naplnenia.*
- ✓ Vrečko je navrhnuté tak, aby bolo vizuálne diskkrétne aj pod bielym oblečením.
- ✓ Tkanina skryje obsah vrečka, aj keď je mokrá.
- ✓ Tkanina vrečka je vodoodolná.