

2020-2021

OSTOMÍA

Guía de productos

Transformamos vidas con productos para
ostomía, atención y apoyo integrales



ConvaTec

Cuidado de la ostomía



Juntos podemos ayudar a TRANSFORMAR VIDAS

La innovación comienza escuchando
y trabajando juntos.

ConvaTec es una empresa internacional dedicada a desarrollar productos y tecnologías para tratar afecciones crónicas. Nuestra línea de productos para ostomía, nuestro programa me+™ de asistencia al paciente y nuestra colaboración con los profesionales de la salud ayudan a mejorar la vida de las personas a las que atendemos.



ÍNDICE

ASISTENCIA me+™	1	KITS PARA CUIDADO AGUDO	59
GENERALIDADES SOBRE LA OSTOMÍA	5	PRODUCTOS PEDIÁTRICOS	69
• Introducción al cuidado de la ostomía.....	5	ACCESORIOS	75
• Cómo elegir el sistema de ostomía adecuado.....	7	BOLSAS PARA HERIDAS Y FÍSTULAS	87
GUÍA SOBRE LOS SISTEMAS DE OSTOMÍA	9	PRODUCTOS DESCONTINUADOS	90
• Guía sobre adhesivos.....	9	RECURSOS Y PROGRAMAS DE APOYO PARA	
• Guía sobre barreras cutáneas.....	11	EL PACIENTE	95
• Barreras cutáneas moldeables.....	13	GUÍA DE UTILIZACIÓN DE MEDICARE	96
• Barreras cutáneas en acordeón.....	15	ÍNDICE DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS	97
• El propósito de la convexidad.....	17	BIBLIOGRAFÍA	102
• Opciones de bolsas de ostomía.....	21		
• Características comunes de las bolsas.....	23		
SISTEMAS DE DOS PIEZAS	25		
• Sistemas Natura™, Natura™+ y Sur-FIT® Natura™	27		
• Sistemas Esteem Synergy®	41		
SISTEMAS DE UNA PIEZA	45		
• Bolsas Esteem™+	46		
• Bolsas ActiveLife®	55		

EXISTE LA NECESIDAD DE BRINDAR APOYO CONSTANTE A LOS PACIENTES

El **segundo motivo más frecuente** de reingresos hospitalarios es la ileostomía y otras cirugías de enterostomía.¹

40%

de los reingresos tras una cirugía colorrectal *se pueden prevenir*.²

30%

de los pacientes con una ostomía presentaron complicaciones en la piel periestomal dentro de los 90 días posteriores a la cirugía.³

49%

de los encuestados manifestaron la necesidad de *información adecuada y comunicación después de la cirugía*.⁴

Las dificultades más habituales que plantea el cuidado de la ostomía por parte del paciente están relacionadas con *las fugas, los problemas cutáneos, la frecuencia de los cambios y la dificultad para cuidar la ostomía*.⁵



EL PROGRAMA me+™ BRINDA APOYO A LOS PACIENTES

El programa me+™ es un programa de apoyo integral diseñado para complementar el cuidado clínico ofreciendo a los pacientes respaldo, inspiración, información e ideas durante su jornada con una ostomía.

Los miembros del programa me+™ pueden:

- ✓ Solicitar muestras gratuitas de productos para ostomía.
- ✓ Hablar con un enfermero especializado en heridas, ostomía y continencia o con un especialista en productos.
- ✓ Conectarse con nuestra comunidad me+.
- ✓ Recibir educación y apoyo continuos con respecto al estilo de vida, y mucho más.

Profesionales de la salud

PARA INSCRIBIR A SUS PACIENTES en el programa me+

Ilámenos al 877-585-0470 o envíe un mensaje por correo electrónico a conciERGE@convatec.com

¿No es un profesional de la salud?

COMUNÍQUESE HOY MISMO CON NOSOTROS para unirse al programa me+

llame al 1-800-422-8811 o envíe un mensaje por correo electrónico a CIC@convatec.com



Nuestro objetivo es *colaborar con usted y sus pacientes para brindar el mejor apoyo* durante toda la experiencia del paciente:

- ✓ **Antes de la cirugía y durante la cirugía**
 - Acceda a recursos en línea en mepluscare.com
 - Solicite el kit inicial me+™ para pacientes y materiales didácticos
 - Inscríbase en el programa me+
 - Obtenga información sobre la serie de recuperación me+, desarrollada para ayudar en la rehabilitación después de la cirugía
- ✓ **Semanas inmediatamente después de la cirugía**
 - Consulte con personal de enfermería especializado en heridas, ostomía y continencia del programa me+ y con especialistas en los productos
 - Kit inicial personalizado
 - Correo electrónico de bienvenida y apoyo del programa me+
 - Folleto de ejercicios fase 1 del programa me+ de recuperación*
- ✓ **Primer año y después**
 - Explore recursos y herramientas en línea
 - Encuentre inspiración en la comunidad me+
 - Pruebe productos nuevos
 - Continúe con los ejercicios de la serie de recuperación me+

A lo largo de toda su jornada, sus pacientes pueden llamar al 1-800-422-8811 para recibir asistencia en directo por parte de personal de enfermería especializado en heridas, ostomía y continencia del programa me+™ y de especialistas en los productos

*La información incluida en la serie no tiene el propósito de constituir un consejo médico. Los pacientes y usuarios deben consultar con su profesional de la salud antes de comenzar a realizar actividad física después de una cirugía de ostomía. En el caso de sentir dolor o molestias, deben dejar de hacer actividad de inmediato y ponerse en contacto con su profesional de la salud.

Un miembro del equipo de servicios del programa me+™ puede ayudar a los profesionales de la salud con lo siguiente:

- ✓ Apoyo personalizado
- ✓ Inscripción de sus pacientes en el programa me+™
- ✓ Entregar un kit inicial me+ y muestras gratuitas de productos para sus pacientes

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, comuníquese con un representante del programa me+ llamando directamente al 877-585-0470.



“Ustedes han sido un gran apoyo para mí. El conocimiento experto y la ayuda al seleccionar el producto ideal para mí fue crucial para mi tranquilidad y pude sentir incluso que todo iba a estar bien con este cambio tan importante de vida”. - Sofia†

†Retrato con modelos, solo con fines ilustrativos.

Introducción al CUIDADO DE LA OSTOMÍA

Existen 3 tipos principales de cirugías de ostomía. Comprender la diferencia fundamental entre ellas es importante para seleccionar el producto adecuado y brindarle el apoyo que necesita.



COLOSTOMÍA (intestino grueso)

Una colostomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se crea una abertura en el abdomen a través de la cual se desvía el intestino grueso para evitar una parte de su trayecto que está enferma o dañada. El intestino grueso se lleva hasta la superficie de la piel y se sutura al abdomen para formar una nueva salida para las heces.

Qué hay que saber sobre una colostomía

- ✓ Se realiza principalmente debido a cáncer o traumatismo de colon o de recto.
- ✓ Puede ser temporal o permanente.
- ✓ En general, las heces son semiformadas o formadas y predecibles, 1 o 2 veces por día.

ILEOSTOMÍA (intestino delgado)

Una ileostomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se crea una abertura en el abdomen a través de la cual se desvía el extremo del intestino delgado para evitar una parte del aparato digestivo que está enferma o dañada. El intestino delgado se lleva hasta la superficie de la piel y se sutura al abdomen para formar una nueva salida para las heces.

Qué hay que saber sobre una ileostomía

- ✓ Se realiza principalmente debido a una enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa).
- ✓ Puede ser temporal o permanente.
- ✓ Las heces son líquidas o pastosas y constantes durante todo el día.
- ✓ El intestino delgado contiene enzimas y ácidos que intervienen en la digestión, y los desechos pueden causar irritación cutánea si entran en contacto con la piel.

UROSTOMÍA (vías urinarias)

Una urostomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se crea una abertura en el abdomen a través de la cual se desvía la orina de la vejiga cuando está dañada o enferma. Después de que se extirpa la vejiga, se separa un trozo del intestino delgado (íleon) del resto de los intestinos. Ese trozo se utiliza como conducto para que la orina salga del cuerpo. Los uréteres se fijan a ese nuevo pasaje y un extremo se lleva hasta una abertura hecha en el abdomen.

Qué hay que saber sobre una urostomía

- ✓ Se realiza principalmente debido a cáncer o inflamación de la vejiga.
- ✓ Siempre es permanente.
- ✓ La orina sale por el estoma a medida que se produce, lo que significa que la salida es constante.
- ✓ La orina puede causar irritación cutánea si entra en contacto con la piel.

Cómo elegir el sistema DE OSTOMÍA ADECUADO

La bolsa de ostomía recoge los desechos de salida del estoma. La bolsa puede ser parte de un sistema de dos piezas o de una sola pieza.



SISTEMA DE 2 PIEZAS

El sistema de dos piezas consta de una barrera cutánea y una bolsa separada que se unen de forma segura. Esta opción permite retirar la bolsa para vaciarla o cambiarla sin necesidad de quitar la barrera cutánea con la misma frecuencia.



Diseñado para pacientes

- ✓ que desean cambiar su bolsa con más frecuencia que la barrera cutánea
- ✓ con una ileostomía, que necesitan vaciar o cambiar la bolsa con frecuencia
- ✓ que hacen actividad física, viajan y practican deportes

SISTEMA DE 1 PIEZA

La barrera cutánea y la bolsa se suministran como una solución integrada que no se puede separar. Con un solo paso simple y práctico, se puede conectar o retirar, lo que brinda cada vez un nuevo comienzo. Esta opción es delgada y flexible y está diseñada para los cambios de sistema más frecuentes.



Diseñado para pacientes

- ✓ después de una cirugía, ya que se elimina cualquier presión extra que se pueda ejercer sobre el abdomen al conectar la barrera cutánea y la bolsa
- ✓ que prefieren cambiarse el sistema de ostomía con frecuencia
- ✓ que optan por un sistema de ostomía flexible y de bajo perfil

Guía sobre ADHESIVOS

El adhesivo es un componente importante de la barrera cutánea. Nuestra línea de productos ofrece una gama de tecnologías en materia de adhesivos que le permitirá seleccionar una solución adecuada a las necesidades de sus pacientes.



STOMAHESIVE® (uso estándar)

Diseñado para las personas que tienen principalmente desechos sólidos, nuestro adhesivo Stomahesive® consta de una exclusiva tecnología de hidrocoloide que se adhiere a la piel con suavidad, protegiéndola de los efectos perjudiciales de los desechos de salida del estoma.

También ofrecemos la opción del Stomahesive® modificado, que cuenta con un toque de aceite mineral que aporta más flexibilidad a la barrera durante el uso y hace más fácil despegarla de la piel.

Diseñado para pacientes

- ✓ con deposiciones semiformadas o formadas
- ✓ que tienen piel sensible
- ✓ que necesitan cambios frecuentes
- ✓ que prefieren un uso estándar

DURAHESIVE® (uso prolongado)

Diseñado para las personas que tienen principalmente desechos líquidos, nuestro adhesivo Durahesive® consta de una tecnología exclusiva de hidrocoloide que se expande al hidratarse para proteger el estoma. Este efecto especial, llamado “cuello de tortuga”, ayuda a crear un sello más seguro sin dañar la piel.

También ofrecemos Durahesive® Plus, que permite una mayor fijación, resistencia y cohesión diseñadas para el uso prolongado o los desechos irritantes.

Diseñado para pacientes

- ✓ con deposiciones semilíquidas o líquidas y orina
- ✓ que desean o necesitan un uso más prolongado

ESTEEM™ + Soft & Flex CONVEX

Adhesivo diseñado con una alta capacidad de fijación inicial para favorecer su adherencia la primera vez que entra en contacto con la piel. La barrera de hidrocoloide presenta un borde estrecho delgado que ayuda a impedir que el borde se enganche en la ropa, y un centro más grueso que favorece la absorción alrededor del estoma.⁶

Diseñado para pacientes

- ✓ con desechos sólidos y líquidos
- ✓ que prefieren un uso estándar

LOS COLLARES DE CINTA se presentan en dos formas:

Acrílico: collar de cinta con buena capacidad de fijación
Hidrocoloide: diseñado para quienes presentan sensibilidad a otros collares de cinta

Guía sobre BARRERAS CUTÁNEAS

La barrera cutánea es la pieza del sistema de bolsa que se adhiere al cuerpo. Debe ajustarse cómodamente alrededor del estoma para evitar que se produzcan fugas y debe tener una abertura según el tamaño y la forma del estoma.



PARA CORTAR A MEDIDA

Las barreras para cortar a medida se pueden cortar para que coincidan con la forma y el tamaño de cada estoma. Se pueden cortar con tijeras en forma de círculo, óvalo o cualquier forma necesaria para que se adapte al estoma.




Diseñado para pacientes

- ✓ con un estoma de tamaño intermedio entre los tamaños precortados
- ✓ con un estoma de forma irregular

PRECORTADAS

Las barreras precortadas tienen un orificio uniforme y circular para el estoma y vienen listas para aplicar. Están disponibles para los tamaños de estoma más comunes.

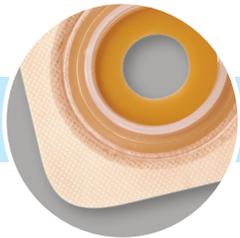


Diseñado para pacientes

- ✓ con un estoma uniformemente circular que se adapta a un tamaño precortado disponible
- ✓ con problemas de destreza que les causan dificultad para cortar

MOLDEABLE

La barrera cutánea ConvaTec Moldable Technology™ con Rebounding Memory Technology™ crea un sello de forma elástica, que se amolda a la mayoría de las formas y tamaños, y luego “forma un cuello de tortuga” hacia arriba para reforzar el sello y proteger la piel.⁷

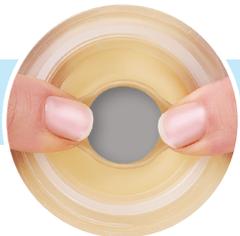

Diseñado para pacientes

- ✓ con un estoma grande, circular, ovalado o de forma irregular
- ✓ con problemas de destreza que les causan dificultad para cortar

Barreras cutáneas MOLDEABLES



Las barreras cutáneas ConvaTec Moldable Technology™ están diseñadas para “abrazar” la abertura del estoma y brindar un calce más personalizado y seguro.

CLÍNICAMENTE PROBADAS


para prevenir las complicaciones de la piel periestomal⁷

Hasta un 55 % de las personas con estomas tienen problemas en la piel.⁸

- 95 % de las personas que comenzaron usando ConvaTec Moldable Technology mantuvieron su piel sana.⁷
- 86 % de las personas que cambiaron a ConvaTec Moldable Technology mejoraron el estado de su piel.⁷

Características y beneficios


- ✓ Requieren menos pasos para la aplicación que las barreras cutáneas tradicionales para cortar a medida.
- ✓ No es necesario cortar.
- ✓ Los materiales con memoria son flexibles, se expanden y contraen suavemente con el estoma.
- ✓ El adhesivo se expande suavemente cuando entra en contacto con los desechos de salida y las heces creando un “cuello de tortuga” para proteger la piel y asegurar el sello.

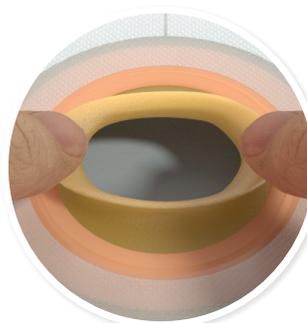

Se enrollan, se moldean y se adaptan a la forma y al tamaño del estoma.



Forman un “cuello de tortuga” alrededor del estoma para impedir que se produzcan fugas.

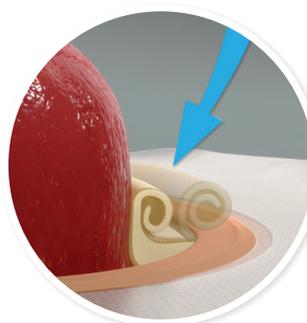

Cuentan con Rebounding Memory Technology™: se enrolla hacia atrás para lograr un calce a medida.

Barreras cutáneas EN ACORDEÓN

La brida en acordeón es una opción disponible con varias barreras cutáneas Natura®. La brida en acordeón se levanta para que entren bien los dedos y se pueda realizar la unión de forma fácil y cómoda.



Diseñado para pacientes

- Dos veces más espacio para los dedos que cualquier otra brida de levantamiento⁹
- Simple de medir y cortar o moldear
- Opciones planas, convexas, para cortar a medida y moldeables
- Compatible con las bolsas SUR-FIT® Natura™ y Natura™+

✓ con problemas de destreza, ya que entran bien los dedos y se puede realizar la unión de forma fácil y cómoda

✓ que necesitan evitar la presión o los traumatismos si tienen sensibilidad abdominal posquirúrgica

CÓMO FUNCIONA

- Diseñada para reducir al mínimo la presión y el dolor en el abdomen al conectar la bolsa.
- Cuando se conecta, se oye un “clic” y se siente un chasquido, que permiten confirmar que la bolsa está bien conectada.



Levante la brida para conectar fácilmente la bolsa alejada del cuerpo.



Tiene perfil bajo cuando **no está levantada** para que no se vea a través de la ropa.

El propósito de LA CONVEXIDAD



¿QUÉ ES LA CONVEXIDAD?

Cada cuerpo es diferente. Las obleas convexas están diseñadas para usar en caso de que el estoma o el abdomen tenga forma irregular con el fin de reducir las fugas y simplificar el manejo del estoma.

- La convexidad es la curva hacia fuera de la base o la barrera cutánea.^{10,11}
- La convexidad aplica una presión uniforme en la piel periestomal inmediata, mejorando la proyección del estoma para el drenaje.¹²
- La convexidad ayuda a mantener un sello seguro entre la bolsa y la piel.¹³

NECESIDAD CRECIENTE DE CONVEXIDAD

Existen datos que muestran que la necesidad de barreras cutáneas convexas aumenta año tras año.¹⁴ Esto se debe a diversos factores, que incluyen lo siguiente:

- Resultados de los cambios en las técnicas quirúrgicas en la forma y el perfil de los estomas
- Aumento de la obesidad


CUÁNDO USAR LA CONVEXIDAD



Estomas al ras
Están ubicados al mismo nivel que la superficie de la piel abdominal y no sobresalen.¹⁵



Estomas retraídos
Están retraídos hacia el interior del abdomen, por debajo del nivel de la piel, o tienen poca boca o no la tienen.¹⁶

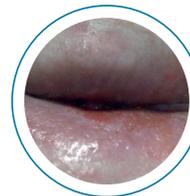

Pliegues de la piel
El estoma se encuentra profundo en un pliegue o arruga de la piel.¹³



Abdómenes blandos o flácidos
Requieren un nivel firme de apoyo para estabilizar el sistema de bolsa.¹⁵

Las características de LA CONVEXIDAD



RIGIDEZ

Convexidad firme o rígida

Comúnmente se utiliza en abdómenes blandos o flácidos.

Convexidad blanda

Comúnmente se utiliza en abdómenes firmes o tonificados.

PROFUNDIDAD

Altura de la meseta convexa.

- ✓ Profunda
- ✓ Superficial



Medición de la profundidad de la convexidad


ANCHO DE LA MESETA

Distancia entre la superficie plana elevado de borde a borde

Por qué es importante el ancho de la meseta

Una convexidad adecuada debe ejercer suficiente presión sobre la piel periestomal para crear un buen sello alrededor de la base del estoma y ayudar a que el estoma sobresalga.¹³

- ✓ **Presión de la convexidad:** un ancho de meseta estrecho puede utilizarse para generar presión directamente alrededor del estoma con menor presión a medida que la meseta se ensancha.
- ✓ **Ancho de la meseta:** una meseta más ancha se puede utilizar para aplanar los pliegues de la piel y alejarlos del estoma.

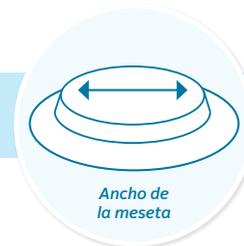

Ancho de la meseta

Elegir la solución adecuada de convexidad según las características corporales puede ser difícil. No dude en consultar con uno de nuestros especialistas del programa me+™ o con el personal de enfermería especializado en heridas, ostomía y continencia para recibir orientación.

Bolsa de ostomía

OPCIONES

ConvaTec ofrece una amplia gama de opciones de bolsas entre sus sistemas de 2 piezas y de 1 pieza.



CERRADA

Una bolsa cerrada no requiere drenaje. Una vez que se llena, simplemente se retira y se reemplaza por una nueva bolsa.

Además, es ideal para la actividad física, los momentos de intimidad, nadar y viajar.



Diseñado para pacientes

- ✓ que tienen desechos formados y gruesos, que son previsibles (1 o 2 veces por día)

DRENABLE

Las bolsas drenables le permiten drenar los desechos varias veces a lo largo del día para no tener que cambiar de bolsa con tanta frecuencia.




Diseñado para pacientes

- ✓ que tienen desechos sueltos y líquidos, o semiformados, que pueden ser imprevisibles o constantes durante todo el día

DE UROSTOMÍA

Una bolsa de urostomía tiene un orificio de descarga tipo grifo, blando o plegable en la parte inferior que permite drenar la orina con la frecuencia que sea necesaria.

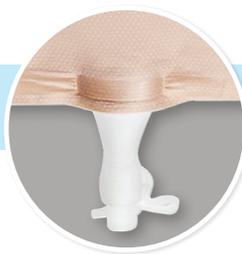

Diseñado para pacientes

- ✓ con una urostomía

Características COMUNES DE LAS BOLSAS



COLOR DE LA BOLSAS



Transparente (parte delantera de la bolsa transparente)

Al ser transparente la parte delantera de la bolsa, se pueden evaluar fácilmente los desechos y determinar cuándo es necesario cambiar o vaciar la bolsa. El lado de la bolsa que queda contra el cuerpo es de material suave y blando.

Opaca (bolsa de color tostado)

Tanto la parte delantera de la bolsa como el lado que queda contra el cuerpo están cubiertos de un material suave y blando que ofrece más discreción y comodidad.



Ventana de visualización

Algunas opciones tienen una ventana de visualización que permite observar y posicionar la bolsa con precisión.

CON FILTRO o SIN FILTRO



Los filtros ayudan a liberar y desodorizar los gases, y a mantener las bolsas cerradas o drenables planas. Es importante señalar que el filtro debe estar protegido con una cubierta al nadar, bañarse o ducharse.

CIERRE DE BOLSAS DRENABLE



Cierre de cola sin clip InvisiClose™

Cierre de bolsa drenable que ofrece la opción de autocierre fácil que no requiere un clip para mayor seguridad.



Lock-it Pocket™

Se cierra de adentro hacia fuera para ocultar la cola de drenaje asegurada, lo que provee la flexibilidad de una bolsa drenable, con la sensación y la comodidad de una bolsa de extremo cerrado.

Las bolsas drenables tradicionales se cierran con un clip.

DRENAJE DE LA BOLSAS DE UROSTOMÍA



El grifo de descarga Accuseal™ con válvula está diseñado para facilitar la manipulación y el vaciado. Otras opciones de drenaje incluyen un orificio de descarga blando o plegable.

Todas las bolsas de urostomía cuentan con una válvula antirreflujo diseñada para evitar el flujo hacia atrás.

Sistemas DE DOS PIEZAS

Los sistemas de dos piezas constan de una **barrera cutánea y una bolsa separada** que se unen de forma segura. Los sistemas de ostomía de dos piezas de ConvaTec están representados por dos marcas: Natura™ + y Esteem Synergy® +.



NATURA™



La marca Natura™ (que incluye Natura™, Sur-Fit Natura™ y Natura™+) ofrece una amplia gama de barreras cutáneas y bolsas que se conectan por medio de un anillo de plástico llamado brida con un diseño simple de apertura y cierre a presión.



ESTEEM SYNERGY®



La marca Esteem Synergy®+ ofrece barreras cutáneas y bolsas que se conectan mediante la tecnología Adhesive Coupling Technology™. Se trata de un anillo de espuma adhesivo flexible y plano, ubicado sobre la bolsa, que se fija sobre una “zona de adherencia” plana de la barrera cutánea.

Guía de colores y tamaños

COINCIDENCIA DE COLOR						
TAMAÑO DE LA BRIDA	1 1/4" (32mm)	1 1/2" (38mm)	1 3/4" (45mm)	2 1/4" (57mm)	2 3/4" (70mm)	4" (100mm)

Guía de colores y tamaños

COINCIDENCIA DE COLOR			
TAMAÑO DE ACOPLAMIENTO	Abertura de estoma pequeña	Abertura de estoma mediana	Abertura de estoma grande



Al solicitar un sistema de dos piezas, **asegúrese de seleccionar el mismo tamaño de brida/acoplamiento para la barrera cutánea y la bolsa**. Use los círculos de colores indicados en la tabla a modo de ayuda.

BARRERAS CUTÁNEAS NATURA™ DURAHESIVE®

Compatibles con bolsas Natura™ + y SUR-FIT® Natura™

✓ Producto recomendado



✓ SUR-FIT® NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Para cortar a medida

- Durahesive® (uso prolongado)
- Cantidad = 10 (*caja de 5)

HCPCS A4409

(413157 y 401905 son HCPCS A4410)

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO	Collar de cinta acrílico TOSTADO	Sin collar de cinta
● 1 1/4" (32mm)	1/2 - 3/4"	413159	413164	413153
● 1 1/2" (38mm)	1/2 - 1"	413160	413165	413154
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 1 1/4"	413161	413166	413155
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 1 3/4"	413162	413167	413156
● 2 3/4" (70mm)	1/2 - 2 1/4"	413163	413168	413157
● 4" (100mm)	1/2 - 3 1/2"	N/C	N/C	401905*



✓ NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Para cortar a medida | Brida en acordeón

- Durahesive® (uso prolongado)
- Cantidad = 10

HCPCS A4409

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 13/16" (13mm-21mm)	421454
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 1 5/16" (13mm-33mm)	421458
● 2 3/4" (70mm)	1/2 - 1 3/4" (13mm-45mm)	421462



✓ NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Moldeable | Brida en acordeón

- Durahesive® (uso prolongado)
- Cantidad = 10

HCPCS A4409

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta hidrocoloide TOSTADO
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	421039
● 2 1/4" (57mm)	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	421040
● 2 3/4" (70mm)	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	421041

 Producto recomendado

 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Para cortar a medida | Convexo | Brida en acordeón

- Durahesive® (uso prolongado)
- Profundidad de la oblea convexa = 6.65mm
- Cantidad = 10

HCPCS A4407

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico TOSTADO	Collar de cinta hidrocoloide TOSTADO
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	421638	421639
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 1 3/8" (13-35mm)	421640	421641
● 2 3/4" (70mm)	1/2 - 1 7/8" (13-48mm)	421642	421643


 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Moldeable

- Durahesive® (uso prolongado)
- Cantidad = 10

HCPCS A4409

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO	Collar de cinta hidrocoloide BLANCO
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	413417	411800
● 1 3/4" (45mm)	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	413418	411802
● 2 1/4" (57mm)	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	413419	411804
● 2 3/4" (70mm)	1 1/4 - 1 3/4" por 1 3/4 - 2 1/8" (33x45mm por 45x56mm) Forma ovalada	413420	411806


 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Moldeable | Convexo

- Durahesive® (uso prolongado)
- Cantidad = 10

HCPCS A4407

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO	Profundidad de la oblea convexa
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	404592	6.35mm
● 1 3/4" (45mm)	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	404593	7mm
● 2 1/4" (57mm)	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	404594	7mm

 SUR-FIT® NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Precortado | Convexo

- Durahesive® (uso prolongado)
- Profundidad de la oblea convexa = 6.65mm
- Cantidad = 10

HCPCS A4407

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO
● 1 3/4" (45mm)	1/2" (13 mm)	413177
● 1 3/4" (45mm)	5/8" (16 mm)	413178
● 1 3/4" (45mm)	3/4" (19 mm)	413179
● 1 3/4" (45mm)	7/8" (22 mm)	413180
● 1 3/4" (45mm)	1" (25 mm)	413181
● 1 3/4" (45mm)	1 1/8" (28 mm)	413182
● 1 3/4" (45mm)	1 1/4" (32 mm)	413183
● 1 3/4" (45mm)	1 3/8" (35 mm)	413184
● 2 1/4" (57mm)	1 1/2" (38 mm)	413185
● 2 1/4" (57mm)	1 5/8" (41 mm)	413186
● 2 1/4" (57mm)	1 3/4" (45 mm)	413187
● 2 1/4" (57mm)	2" (50 mm)	413188



BARRERAS CUTÁNEAS NATURA™ STOMAHESIVE®

Compatibles con bolsas Natura™ y SUR-FIT® Natura™

 Producto recomendado



 SUR-FIT® NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Para cortar a medida

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10 (*caja de 5)

HCPCS A4414

(401577 y 401906 son HCPCS A4415)

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO	Collar de cinta acrílico TOSTADO	Sin collar de cinta
● 1 1/4" (32mm)	1/2 - 3/4"	125257	125262	401573
● 1 1/2" (38mm)	1/2 - 1"	125258	125263	401574
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 1 1/4"	125259	125264	401575
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 1 3/4"	125260	125265	401576
● 2 3/4" (70mm)	1/2 - 2 1/4"	125261	125266	401577
● 4" (100mm)	1/2 - 3 1/2"	N/C	N/C	401906*



 SUR-FIT® NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Precortado

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico TOSTADO
● 1 3/4" (45mm)	1/2" (13 mm)	125267
● 1 3/4" (45mm)	5/8" (16 mm)	125268
● 1 3/4" (45mm)	3/4" (19 mm)	125269
● 1 3/4" (45mm)	7/8" (22 mm)	125270
● 1 3/4" (45mm)	1" (25 mm)	125271
● 1 3/4" (45mm)	1 1/8" (28 mm)	125272
● 1 3/4" (45mm)	1 1/4" (32 mm)	125273
● 1 3/4" (45mm)	1 3/8" (35 mm)	125274
● 2 1/4" (57mm)	1 1/2" (38 mm)	125275
● 2 1/4" (57mm)	1 5/8" (41 mm)	125276
● 2 1/4" (57mm)	1 3/4" (45 mm)	125277



 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Para cortar a medida | Brida en acordeón

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 13/16" (13-21mm)	421456
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 1 5/16" (13-33mm)	421460
● 2 3/4" (70mm)	1/2 - 1 3/4" (13-45mm)	421464

 Producto recomendado



 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Moldeable | Brida en acordeón

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta hidrocoloide TOSTADO
● 2 1/4" (57mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	421033
● 2 1/4" (57mm)	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	421034
● 2 3/4" (70mm)	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	421035



 NATURA™ BARRERA CUTÁNEA

Moldeable

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de la brida	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO	Collar de cinta hidrocoloide BLANCO
● 1 3/4" (45mm)	1/2 - 7/8" (13-22mm)	413421	411801
● 1 3/4" (45mm)	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	413422	411803
● 2 1/4" (57mm)	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	413423	411805
● 2 3/4" (70mm)	1 1/4 - 1 3/4" por 1 3/4 - 2 1/8" (33x45mm por 45x56mm) Forma ovalada	413424	411807

BOLSAS NATURA™ +

Compatibles con barreras cutáneas SUR-FIT® Natura™ y Natura™

 Producto recomendado



 NATURA™+ BOLSA

Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Longitud de la bolsa = 12" (*longitud de la bolsa = 14")
- Cantidad = 10

HCPCS A5063 | Sin filtro

Tamaño de la brida	Transparente	Opaca
● 1 3/4" (45mm)	416418	421738
● 2 1/4" (57mm)	416421	421739
● 2 3/4" (70mm)	416424	421740
● 4" (100mm)	416472*	N/C

HCPCS A4425 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de la brida	Transparente	Opaca con ventana de visualización	Opaca
● 1 1/2" (38mm)	416414	421746	416415
● 1 3/4" (45mm)	416416	421747	416417
● 2 1/4" (57mm)	416419	421748	416420
● 2 3/4" (70mm)	416422	421749	416423

SUR-FIT® NATURA™ BOLSA

Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = véase la tabla a continuación

**HCPCS A5063 | Sin filtro**

	Tamaño de la brida	Transparente Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20
●	1 3/4" (45mm)	413312	413334
●	2 1/4" (57mm)	413313	N/C
●	2 3/4" (70mm)	413314	N/C

HCPCS A4425 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

	Tamaño de la brida	Transparente Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20
●	1 3/4" (45mm)	411360	411310
●	2 1/4" (57mm)	411361	411311
●	2 3/4" (70mm)	411362	N/C

SUR-FIT® NATURA™ BOLSA

Drenable | Cierre con clip

- Longitud de la bolsa = 10"
- 2 cierres de cola por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación

**HCPCS A5063 | Sin filtro**

	Tamaño de la brida	Opaca Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20
●	1 1/4" (32mm)	401505	404030
●	1 1/2" (38mm)	401506	404031
●	1 3/4" (45mm)	401507	404032
●	2 1/4" (57mm)	401508	404033
●	2 3/4" (70mm)	401509	404034

SUR-FIT® NATURA™ BOLSA

Drenable | Cierre con clip

- Longitud de la bolsa = 12" (*longitud de la bolsa = 14", **longitud de la bolsa = 10")
- 2 cierres de cola por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación

**HCPCS A5063 | Sin filtro**

	Tamaño de la brida	Transparente Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20	Opaca con 1 panel de comodidad Cantidad = 10	Opaca con 1 panel de comodidad Cantidad = 20
●	1 1/4" (32mm)	401510	401500	404025	401932	404014
●	1 1/2" (38mm)	401511	401501	404026	401933	404015
●	1 3/4" (45mm)	401512	401502	404027	401934	404016
●	2 1/4" (57mm)	401513	401503	404028	401935	404017
●	2 3/4" (70mm)	401514	401504	404029	401936	404018
●	4" (100mm)	401515*	N/C	N/C	N/C	N/C

HCPCS A4425 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

	Tamaño de la brida	Transparente Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20	Opaca Cantidad = 20**
●	1 1/4" (32mm)	N/C	411489	411288**
●	1 1/2" (38mm)	411264	411490	411289**
●	1 3/4" (45mm)	411265	411491	411290**
●	2 1/4" (57mm)	411266	411492	411291**
●	2 3/4" (70mm)	411267	411493	411292**

 Producto recomendado

BOLSA SUR-FIT® NATURA™

Drenable | Gran capacidad

- Válvula antirreflujo
- Salida con boquilla y tapa para gran capacidad de drenaje
- Longitud de la bolsa = 14"
- 1 cierre de cola, 1 adaptador de drenaje nocturno y 5 filtros de repuesto por caja
- Cantidad = 5



HCPCS A4413 | Con filtro

Tamaño de la brida	Transparente	Opaca
● 1 3/4" (45mm)	420695	401557
● 2 1/4" (57mm)	420696	401558
● 2 3/4" (70mm)	420697	401559


 BOLSA NATURA™+

Extremo cerrado

- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 30

HCPCS A5054 | Sin filtro

Tamaño de la brida	Opaca con ventana de visualización
● 1 1/4" (32mm)	421677
● 1 1/2" (38mm)	421679
● 1 3/4" (45mm)	421681
● 2 1/4" (57mm)	421683
● 2 3/4" (70mm)	421893

HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de la brida	Opaca con ventana de visualización	Opaca
● 1 1/4" (32mm)	421676	N/C
● 1 1/2" (38mm)	421678	416403
● 1 3/4" (45mm)	421680	416406
● 2 1/4" (57mm)	421682	416409
● 2 3/4" (70mm)	421798	416412

BOLSA NATURA™+

Extremo cerrado

- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 30



HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de la brida	Opaca con ventana de visualización
● 1 3/4" (45mm)	421796
● 2 1/4" (57mm)	421797

BOLSA SUR-FIT® NATURA™

Extremo cerrado

- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = véase la tabla a continuación



HCPCS A5054 | Sin filtro

Tamaño de la brida	Opaca Cantidad = 30	Opaca Cantidad = 60
● 1 3/4" (45mm)	401522	413170
● 2 1/4" (57mm)	401523	413171
● 2 3/4" (70mm)	401524	N/C

HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de la brida	Opaca Cantidad = 30	Opaca Cantidad = 60
● 1 3/4" (45mm)	401526	413174
● 2 1/4" (57mm)	401527	413175
● 2 3/4" (70mm)	401528	N/C

 Producto recomendado

BOLSA SUR-FIT® NATURA™

Extremo cerrado | Tapa de brida

- Cantidad = 25



HPCPS A5055 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de la brida Opaca con 1 panel de comodidad

●	1 3/4" (45mm)	401909
---	---------------	--------



 BOLSA SUR-FIT® NATURA™

Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 10" (*longitud de la bolsa = 9")
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 10

HPCPS A4432

	Tamaño de la brida	Transparente	Opaca	Opaca*
●	1 1/4" (32mm)	401542	401551	401547*
●	1 1/2" (38mm)	401543	401552	401548*
●	1 3/4" (45mm)	401544	401553	401549*
●	2 1/4" (57mm)	401545	401554	401550*
●	2 3/4" (70mm)	401546	401555	N/C

BOLSA NATURA™+

Urostomía | Orificio de descarga blando

- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 10" (*longitud de la bolsa = 9")
- 2 adaptadores de drenaje para orificio de descarga blando por caja
- Cantidad = 10



HPCPS A5073

	Tamaño de la brida	Transparente	Transparente*
●	1 1/4" (32mm)	N/C	421074*
●	1 3/4" (45mm)	413437	N/C
●	2 1/4" (57mm)	413438	N/C
●	2 3/4" (70mm)	413439	N/C

BOLSA SUR-FIT® NATURA™

Urostomía | Orificio de descarga plegable

- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 10" (*longitud de la bolsa = 9")
- 2 adaptadores de drenaje nocturno universales por caja
- Cantidad = 10



HPCPS A5073

	Tamaño de la brida	Transparente	Transparente*
●	1 1/4" (32mm)	401533	401538*
●	1 1/2" (38mm)	401534	401539*
●	1 3/4" (45mm)	401535	401540*
●	2 1/4" (57mm)	401536	401541*
●	2 3/4" (70mm)	401537	N/C

ESTEEM SYNERGY® BARRERAS CUTÁNEAS

Compatibles con bolsas Esteem Synergy®+

BARRERA CUTÁNEA ESTEEM SYNERGY®



Para cortar a medida

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de acoplamiento	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO
● Abertura de estoma pequeña	hasta 1 3/8" (35mm)	405456
● Abertura de estoma mediana	hasta 1 7/8" (48mm)	405457
● Abertura de estoma grande	hasta 2 3/8" (61mm)	405458

HCPCS A4415 (*HCPCS es A4414)

Tamaño de acoplamiento	Rango de corte	Sin collar de cinta
● Abertura de estoma pequeña	hasta 1 3/8" (35mm)	405467*
● Abertura de estoma mediana	hasta 1 7/8" (48mm)	405468
● Abertura de estoma grande	hasta 2 3/8" (61mm)	403948

BARRERA CUTÁNEA ESTEEM SYNERGY®



Moldeable

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de acoplamiento	Tamaño del estoma	Collar de cinta hidrocoloide BLANCO
● Abertura de estoma mediana	1/2 - 7/8" (13-22mm)	411657
● Abertura de estoma mediana	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	411658
● Abertura de estoma grande	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	411659

BARRERA CUTÁNEA ESTEEM SYNERGY®



Moldeable | Convexo

- Durahesive® (uso prolongado)
- Profundidad de la oblea convexa = 6.65mm
- Cantidad = 10

HCPCS A4407

Tamaño de acoplamiento	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO
● Abertura de estoma pequeña	1/2 - 7/8" (13-22mm)	409268
● Abertura de estoma mediana	7/8 - 1 1/4" (22-33mm)	409269
● Abertura de estoma grande	1 1/4 - 1 3/4" (33-45mm)	409270

BARRERA CUTÁNEA ESTEEM SYNERGY®



Precortada

- Stomahesive® (uso estándar)
- Cantidad = 10

HCPCS A4414

Tamaño de acoplamiento	Tamaño del estoma	Collar de cinta acrílico BLANCO
● Abertura de estoma pequeña	5/8" (16 mm)	405473
● Abertura de estoma pequeña	3/4" (19 mm)	405474
● Abertura de estoma pequeña	7/8" (22 mm)	405475
● Abertura de estoma pequeña	1" (25 mm)	405476
● Abertura de estoma pequeña	1 1/8" (28 mm)	405477
● Abertura de estoma pequeña	1 1/4" (32 mm)	405478
● Abertura de estoma pequeña	1 3/8" (35 mm)	405479
● Abertura de estoma mediana	1 1/2" (38 mm)	405480
● Abertura de estoma mediana	1 5/8" (41 mm)	405481
● Abertura de estoma mediana	1 3/4" (45 mm)	405482

ESTEEM SYNERGY® BOLSAS

Compatibles con barreras cutáneas Esteem Synergy®

BOLSA ESTEEM SYNERGY® +

Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10



HCPCS A5063 | Sin filtro

Tamaño de acoplamiento	Transparente
● Abertura de estoma grande	416903

HCPCS A4425 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de acoplamiento	Transparente	Opaca
● Abertura de estoma pequeña	416795	416796
● Abertura de estoma mediana	416798	416799
● Abertura de estoma grande	416901	416902

BOLSA ESTEEM SYNERGY® +

Extremo cerrado

- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 30



HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de acoplamiento	Transparente	Opaca
● Abertura de estoma pequeña	416774	416775
● Abertura de estoma mediana	416778	416779
● Abertura de estoma grande	416782	416783

BOLSA ESTEEM SYNERGY® +

Extremo cerrado

- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 30



HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño de acoplamiento	Transparente	Opaca
● Abertura de estoma pequeña	416776	416777
● Abertura de estoma mediana	N/C	416781

BOLSA ESTEEM SYNERGY®

Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 10" (*longitud de la bolsa = 9")
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 10



HCPCS A4432

Tamaño de acoplamiento	Transparente	Transparente*	Opaca
● Abertura de estoma pequeña	405451	405446*	405448
● Abertura de estoma mediana	405452	405447*	405449
● Abertura de estoma grande	405453	N/C	405450

Sistemas DE UNA PIEZA

DOS MARCAS componen los sistemas de ostomía de una piezas de ConvaTec



ESTEEM™+

La marca Esteem™+ es una solución integral que combina la barrera cutánea y la bolsa en una sola unidad. Con un diseño fácil y práctico, se conecta y se retira con un solo y sencillo paso. Disponible con múltiples opciones de adhesivo y convexidad, más las últimas tecnologías de bolsa ConvaTec.



ActiveLife®

Active Life® es una marca establecida de sistema de una pieza que también combina la barrera cutánea y la bolsa en una misma unidad.

BOLSAS ESTEEM™+

✓ Producto recomendado



✓ BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Durahesive® Plus (*uso prolongado*)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10

HCPCS A5056 | Con filtro
(Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Transparente	Opaca
3/4 - 2 1/2" (19-64mm)	416976	416975



✓ BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® modificado (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10

HCPCS A5061 | Sin filtro

Rango de corte	Transparente	Opaca con ventana de visualización
13/16 - 2 3/4" (20-70mm)	416721	421853

HCPCS A4424 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Transparente	Opaca con Ventana de visualización	Opaca
13/16 - 2 3/4" (20-70mm)	416718	421858	416719

 Producto recomendado

 BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® (uso estándar)*
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 14"
- Cantidad = 10

HCPCS A5061 | Sin filtro

Rango de corte

Transparente

Hasta 4" (100mm)

416908

*Adhesivo de doble capa (Stomahesive para contacto con el cuerpo, Durahesive en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive con la protección del efecto "cuello de tortuga" de Durahesive.


 BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Drenable | Cierre con clip

- Stomahesive® modificado (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 12"
- 2 cierres de cola por caja
- Cantidad = 10

HCPCS A4424 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)*

Rango de corte

Transparente

13/16 - 2 3/4" (20-70mm)

421848


 BOLSA ESTEEM™+

Precortada | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® modificado (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10

HCPCS A5061 | Sin filtro

Tamaño del estoma	Opaca con ventana de visualización
1" (25mm)	421854
1 3/16" (30mm)	421855
1 3/8" (35mm)	421856
1 9/16" (40mm)	421857

HCPCS A4424 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca con ventana de visualización	Opaca
1" (25mm)	416724	421859	416725
1 3/16" (30mm)	416728	421860	416729
1 3/8" (35mm)	416732	421861	416733
1 9/16" (40mm)	416736	421862	416737


 BOLSA ESTEEM™+

Moldeable | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10

HCPCS A5061 | Sin filtro

Tamaño del estoma	Transparente
13/16 - 1 3/16" (20-30mm)	413518
1 3/16 - 1 9/16" (30-40mm)	413519
1 9/16 - 1 15/16" (40-50mm)	413520

HCPCS A4424 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca con ventana de visualización
13/16 - 1 3/16" (20-30mm)	413515	413521
1 3/16 - 1 9/16" (30-40mm)	413516	413522
1 9/16 - 1 15/16" (40-50mm)	413517	413523



BOLSA ESTEEM™+

Precortada | Drenable | Convexa | Cierre de cola InvisiClose™

- Durahesive® (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico
- Profundidad de la oblea convexa = 5mm
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 10

HCPCS A5057 | Con filtro
(Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca
3/4" (19mm)	416738	416739
7/8" (22mm)	416740	416741
1" (25mm)	416742	416743
1 1/8" (28mm)	416744	416745
1 1/4" (32mm)	416746	416747
1 3/8" (35mm)	416748	416749
1 1/2" (38mm)	416750	416751

BOLSA ESTEEM™+ FLEX CONVEX



Para cortar a medida | Drenable | Convexa

- Adhesivo Esteem™ + Flex Convex (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Profundidad de la oblea convexa = 7mm
- Cierre sin clip de sello seguro (1 cierre de cola por caja)
- Longitud de la bolsa = 8 2/3"
- Incluye pestañas para cinturón
- Cantidad = 10

HCPCS A4389 | Con filtro
(Se incluyen las cubiertas de filtro)


Rango de corte	Tamaño de la meseta	Opaca con ventana de visualización
3/4 - 1" (20-25mm)	V3	421622
3/4 - 1 3/8" (20-35mm)	V2	421619
3/4 - 1 2/3" (20-43mm)	V1	421615
3/4 - 2 6/25" (20-57mm)	V0	422159

Precortada | Drenable | Convexa

HCPCS A4389 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Tamaño de la meseta	Opaca con ventana de visualización
1" (25mm)	V2	421620
1 1/6" (30mm)	V2	421621
1" (25mm)	V1	421616
1 1/6" (30mm)	V1	421617
1 3/8" (35mm)	V1	421618

Guía de anchos de meseta para Esteem™+ Flex y Soft Convex

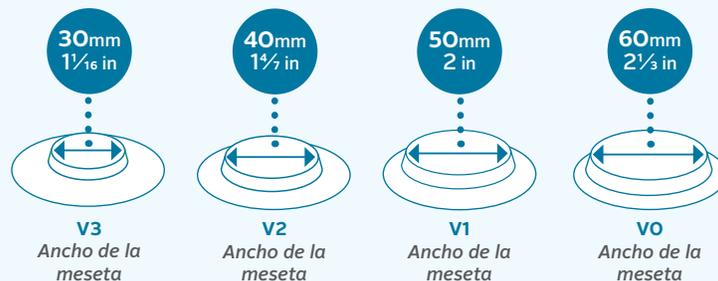

BOLSA ESTEEM™+ SOFT CONVEX



Para cortar a medida | Drenable | Convexa

- Adhesivo Esteem™ + Soft Convex (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Profundidad de la oblea convexa = 4mm
- Cierre sin clip de sello seguro (1 cierre de cola por caja)
- Longitud de la bolsa = 8 2/3"
- Incluye pestañas para cinturón
- Cantidad = 10

HCPCS A4389 | Con filtro
(Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Tamaño de la meseta	Opaca con ventana de visualización
3/8 - 1 1/8" (10-28mm)	V3	422365
3/5 - 1 3/5" (15-40mm)	V2	422364
3/4 - 1 7/8" (20-47mm)	V1	422363

Precortada | Drenable | Convexa

HCPCS A4389 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Tamaño de la meseta	Opaca con ventana de visualización
1" (25mm)	V2	422545
1 1/6" (30mm)	V2	422546
1" (25mm)	V1	422539
1 1/6" (30mm)	V1	422540
1 3/8" (35mm)	V1	422541

 Producto recomendado



 BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Extremo cerrado

- Stomahesive® modificado (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 30

HCPCS A4416 | Con filtro

(Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Transparente	Opaca con ventana de visualización	Opaca
13/16 - 2 3/4" (20-70mm)	416700	421821	416701

BOLSA ESTEEM™+

Para cortar a medida | Extremo cerrado

- Stomahesive® modificado (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 30

HCPCS A4416 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Opaca con ventana de visualización
13/16 - 2 3/4" (20-70mm)	421816



BOLSA ESTEEM™+

Precortada | Extremo cerrado

- Stomahesive® modificado (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 30

HCPCS A4416 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca con ventana de visualización	Opaca
1" (25mm)	416703	421687	416704
1 3/16" (30mm)	416709	421688	416707
1 3/8" (35mm)	416706	421689	416710
1 9/16" (40mm)	416712	421822	416713
2" (50mm)	N/C	421823	416715

BOLSA ESTEEM™+

Moldeable | Extremo cerrado

- Stomahesive® (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 30

HCPCS A4416 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Opaca con ventana de visualización
13/16 - 1 3/16" (20-30mm)	413509
1 3/16 - 1 9/16" (30-40mm)	413510



 Producto recomendado



 BOLSA ESTEEM™+

Urostomía | Para cortar a medida | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Durahesive® (*uso prolongado*)
- Collar de cinta acrílico
- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 10"
- Incluye pestañas para cinturón
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 10

HCPCS A4428

Rango de corte

Transparente

1/2 - 1 3/4" (13-45mm)

421631



 BOLSA ESTEEM™+ FLEX CONVEX

Urostomía | Para cortar a medida | Convexa

- Adhesivo Esteem™ + Flex Convex (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Profundidad de la oblea convexa = 7mm
- Cierre con orificio de descarga blando
- Longitud de la bolsa = 7 2/3"
- Incluye pestañas para cinturón
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Esteem™ + Flex Convex por caja
- Cantidad = 10

HCPCS A4392

Rango de corte

Tamaño de la meseta

Opaca con ventana de visualización

3/8 - 1" (10-25mm)

V3

421628

3/8 - 1 3/8" (10-35mm)

V2

421626

3/8 - 1 2/3" (10-43mm)

V1

421623

Urostomía | Precortada | Convexa

HCPCS A4392

Tamaño del estoma

Tamaño de la meseta

Opaca con ventana de visualización

9/16" (15mm)

V3

421629

9/16" (15mm)

V2

421627

9/16" (15mm)

V1

421624

4/5" (20mm)

V1

421625



 BOLSA ESTEEM™+ SOFT CONVEX

Urostomía | Para cortar a medida | Convexa

- Adhesivo Esteem™ + Soft Convex (*uso estándar*)
- Sin collar de cinta
- Profundidad de la oblea convexa = 4mm
- Cierre con orificio de descarga blando
- Longitud de la bolsa = 7 2/3"
- Incluye pestañas para cinturón
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Esteem™ + Soft Convex por caja
- Cantidad = 10

HCPCS A4392

Rango de corte

Tamaño de la meseta

Opaca con ventana de visualización

3/8 - 1 1/8" (10-28mm)

V3

422562

3/5 - 1 3/5" (15-40mm)

V2

422557

3/4 - 1 7/8" (20-47mm)

V1

422551

Urostomía | Precortada | Convexa

HCPCS A4392

Tamaño del estoma

Tamaño de la meseta

Opaca con ventana de visualización

4/5" (20mm)

V3

422564

1" (25mm)

V3

422565

4/5" (20mm)

V2

422558

1" (25mm)

V2

422559

1 1/6" (30mm)

V2

422560

1" (25mm)

V1

422552

1 1/6" (30mm)

V1

422553

BOLSAS ACTIVELIFE®

BOLSA ACTIVELIFE®

Para cortar a medida | Drenable | Cierre con clip

- Stomahesive® (uso estándar)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 12"
- 1 cierre de cola por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación

HCPCS A5061 | Sin filtro

Rango de corte	Transparente Cantidad = 1	Transparente Cantidad = 10	Transparente Cantidad = 20
3/4 - 2 1/2" (19-64mm)	025433	022771	125330

BOLSA ACTIVELIFE®

Para cortar a medida | Drenable | Cierre con clip

- Durahesive® Plus (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 12"
- 1 cierre de cola por caja
- Cantidad = 10

HCPCS A4388 | Sin filtro

Rango de corte	Transparente	Opaca
3/4 - 2 1/2" (19-64mm)	400598	400599



BOLSA ACTIVELIFE®

Precortada | Drenable | Cierre con clip

- Stomahesive® (uso estándar)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 12" (*longitud de la bolsa = 10")
- 1 cierre de cola por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación

HCPCS A5061 | Sin filtro

Tamaño del estoma	Transparente Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 10	Opaca Cantidad = 20	Opaca* Cantidad = 10	Opaca* Cantidad = 20
3/4" (19mm)	022764	022757	125338	022750*	125331*
1" (25mm)	022765	022758	125339	022751*	N/C
1 1/4" (32mm)	022766	022759	125340	022752*	125333*
1 1/2" (38mm)	022767	022760	125341	022753*	125334*
1 3/4" (45mm)	022768	022761	125342	022754*	125335*
2" (50mm)	022769	022762	125343	022755*	125336*
2 1/2" (64mm)	022770	022763	125344	022756*	125337*

BOLSA ACTIVELIFE®

Precortada | Drenable | Convexa | Cierre con clip

- Durahesive® (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 12"
- 1 cierre de cola por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación

HCPCS A4390 | Sin filtro

Tamaño del estoma	Transparente Cantidad = 5
3/4" (19mm)	175777
7/8" (22mm)	175778
1" (25mm)	175779
1 1/8" (28mm)	175780
1 1/4" (32mm)	175781
1 3/8" (35mm)	175782
1 1/2" (38mm)	175783
1 3/4" (45mm)	175784
2" (50mm)	175785



BOLSA ACTIVELIFE®

Para cortar a medida | Tapón para estoma

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Cantidad = 30



HCPCS A5055 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Rango de corte	Opaca
3/4 - 2" (19 - 50mm)	175611

BOLSA ACTIVELIFE®

Urostomía | Precortada | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Durahesive® (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico
- Válvula antirreflujo
- Longitud de la bolsa = 8"
- Incluye pestañas para cinturón
- 2 adaptadores de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 10



HCPCS A4428

Tamaño del estoma	Transparente
3/4" (19mm)	650828
7/8" (22mm)	650829
1" (25mm)	650830
1 1/8" (28mm)	650831
1 1/4" (32mm)	650832
1 1/2" (38mm)	650833

BOLSA ACTIVELIFE®

Urostomía | Para cortar a medida | Orificio de descarga plegable

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 9"
- Incluye pestañas para cinturón
- 1 adaptador de drenaje nocturno universal por caja
- Cantidad = 10



HCPCS A5071

Rango de corte	Transparente
3/4 - 1 3/4" (19-45mm)	064927

BOLSA ACTIVELIFE®

Urostomía | Precortada | Convexa | Orificio de descarga plegable

- Durahesive® (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico
- Longitud de la bolsa = 8"
- Incluye pestañas para cinturón
- 1 adaptador de drenaje nocturno universal por caja
- Cantidad = véase la tabla a continuación



HCPCS A4393

Tamaño del estoma	Transparente Cantidad = 5	Transparente Cantidad = 10
1/2" (13mm)	175790	125361
5/8" (16mm)	175791	125362
3/4" (19mm)	175792	125363
7/8" (22mm)	175793	125364
1" (25mm)	175794	125365
1 1/8" (28mm)	175795	125366
1 1/4" (32mm)	175796	125367
1 3/8" (35mm)	175797	125368
1 1/2" (38mm)	175798	125369

KITS PARA CUIDADOS AGUDOS

ConvaTec ofrece una línea para cuidados agudos que incluye kits quirúrgicos y posquirúrgicos en combinaciones estériles y no estériles, además de kits de dosis individuales.

La información sobre los componentes de los kits para cuidados agudos se puede encontrar debajo de las tablas de información del producto.

Guía de colores y tamaños

COINCIDENCIA DE COLOR						
TAMAÑO DE LA BRIDA	1 1/4" (32mm)	1 1/2" (38mm)	1 3/4" (45mm)	2 1/4" (57mm)	2 3/4" (70mm)	4" (100mm)

KITS QUIRÚRGICOS Y POSQUIRÚRGICOS SISTEMA DE DOS PIEZAS

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA NATURA™ +

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Barrera cutánea de doble capa⁺ (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 12" (*longitud de la bolsa = 14")
- 1 adaptador de baja presión
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A

	Tamaño de la brida	Kit no estéril	Kit estéril	Varilla de ostomía
	1 3/4" (45mm)	416919	416920	Ninguna
	2 1/4" (57mm)	416923	416924	Ninguna
	2 3/4" (70mm)	416927	416928	65mm
	4" (100mm)	416929	416930	90mm

*Adhesivo de doble capa (Stomahesive para contacto con el cuerpo, Duraheasive en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive con la protección del efecto "cuello de tortuga" de Duraheasive.

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit* similar a Stomahesive®	Barrera cutánea del kit* similar a Duraheasive®	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión	Varilla de ostomía
416919/ 416920	401575	413155	416418	401993	Ninguna
416923/ 416924	401576	413156	416421	401994	Ninguna
416927/ 416928	401577	413157	416424	401995	022355
416929/ 416930	401906	401905	416472	401996	022356

*La barrera cutánea de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En la tabla anterior, se presentan las barreras cutáneas similares.

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA NATURA™ +

Moldeable | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Durahesive® (*uso prolongado*)
- Collar de cinta hidrocoloide (*blanco*)
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 12"
- 1 adaptador de baja presión
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	416917
●	2 1/4" (57mm)	416921
●	2 3/4" (70mm)	416925

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión
416917	411802	416418	401993
416921	411804	416421	401994
416925	411806	416424	401995

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA NATURA™ +

Moldeable | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® (*uso estándar*)
- Collar de cinta hidrocoloide (*blanco*)
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 12"
- 1 adaptador de baja presión
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	416918
●	2 1/4" (57mm)	416922
●	2 3/4" (70mm)	416926

Continúa 

Kit de barrera cutánea Natura™ y bolsa Natura™ +
Moldeable | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión
416918	411803	416418	401993
416922	411805	416421	401994
416926	411807	416424	401995

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA NATURA™ +

Moldeable | Brida en acordeón | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Durahesive® (*uso prolongado*)
- Collar de cinta hidrocoloide (*tostado*)
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	2 1/4" (57mm)	421045
●	2 1/4" (57mm)	421046
●	2 3/4" (70mm)	421047

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit
421045	421039	416421
421046	421040	416421
421047	421041	416424

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA NATURA™ +

Moldeable | Brida en acordeón | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® (*uso estándar*)
- Collar de cinta hidrocoloide (*tostado*)
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 12"
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	2 1/4" (57mm)	421042
●	2 1/4" (57mm)	421043
●	2 3/4" (70mm)	421044

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit
421042	421033	416421
421043	421034	416421
421044	421035	416424

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA SUR-FIT® NATURA™ +

Moldeable | Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Durahesive® (*uso prolongado*)
- Collar de cinta hidrocoloide (*blanco*)
- Válvula antirreflujo
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 10"
- 1 adaptador de baja presión
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	416932
●	2 1/4" (57mm)	416940
●	2 3/4" (70mm)	416948

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión
416932	411802	401544	401993
416940	411804	401545	401994
416948	411806	401546	401995

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA SUR-FIT® NATURA™ +

Moldeable | Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Stomahesive® (uso estándar)
- Collar de cinta hidrocoloide (blanco)
- Válvula antirreflujo
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 10"
- 1 adaptador de baja presión
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	416934
●	2 1/4" (57mm)	416942
●	2 3/4" (70mm)	416950

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión
416934	411803	401544	401993
416942	411805	401545	401994
416950	411807	401546	401995

KIT DE BARRERA CUTÁNEA NATURA™ Y BOLSA SUR-FIT® NATURA™ +

Para cortar a medida | Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Barrera cutánea de doble capa[†] (uso estándar)
- Collar de cinta acrílico (blanco)
- Válvula antirreflujo
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 10"
- 1 adaptador de baja presión
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | Estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	416938
●	2 1/4" (57mm)	416946
●	2 3/4" (70mm)	416954

[†]Adhesivo de doble capa (Stomahesive para contacto con el cuerpo, Durahesive en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive con la protección del efecto "cuello de tortuga" de Durahesive.

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit* similar a Stomahesive®	Barrera cutánea del kit* similar a Durahesive®	Bolsa del kit	Adaptador de baja presión
416938	401575	413155	401544	401993
416946	401576	413156	401545	401994
416954	401577	413157	401546	401995

*La barrera cutánea de doble capa del kit no se encuentra disponible al por menor. En la tabla anterior, se presentan las barreras cutáneas similares.

VARILLA DE OSTOMÍA CONVATEC

Estéril

- Cantidad = 10

HCPCS A4421

	Tamaño de la brida	Tamaño	Código del producto
●	2 3/4" (70mm)	65mm	022355
●	4" (100mm)	90mm	022356



KITS QUIRÚRGICOS Y POSQUIRÚRGICOS SISTEMA DE UNA PIEZA

KIT DE BOLSA ESTEEM™ +

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Barrera cutánea de doble capa[†] (uso estándar)
- Collar de cinta acrílico
- Color: Transparente
- Longitud de la bolsa = 14"
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A

Rango de corte	Kit no estéril	Kit estéril
Se puede agrandar para adaptarse a estomas de hasta 4" (100mm)	416915	416916

[†]Adhesivo de doble capa (Stomahesive para contacto con el cuerpo, Durahesive en la parte superior) que combina los aspectos favorables para la piel de Stomahesive con la protección del efecto "cuello de tortuga" de Durahesive.

KITS DE DOSIS INDIVIDUALES

KIT DE BARRERA CUTÁNEA SUR-FIT® NATURA™ Y BOLSA SUR-FIT® NATURA™ +

Para cortar a medida | Urostomía | Orificio de descarga con válvula Accuseal™

- Durahesive® (uso prolongado)
- Collar de cinta acrílico (blanco)
- Color de la bolsa: Transparente
- Longitud de la bolsa = 10"
- 1 adaptador de drenaje nocturno Accuseal por caja
- Cantidad = 5 Kits

HCPCS N/A | No estéril

	Tamaño de la brida	Código de producto del kit
●	1 3/4" (45mm)	401923
●	2 1/4" (57mm)	401924

Los kits anteriores incluyen los siguientes componentes:

Kit	Barrera cutánea del kit	Bolsa del kit
401923	413161	401544
401924	413162	401545

Productos DE USO PEDIÁTRICO

LITTLE ONES es un sistema de dos piezas y de una pieza, para uso pediátrico, diseñado para bebés con un peso inferior a 4.5 kg (10 libras) y para niños con un peso superior a 4.5 kg (10 libras).

Las bolsas tienen bordes con uniones suaves y tamaños más pequeños diseñados para brindar mayor comodidad a los más pequeños.



Guía de colores y tamaños

! Al solicitar un sistema de dos piezas pediátrico, **asegúrese de seleccionar el mismo tamaño de brida/acoplamiento para la barrera cutánea y la bolsa.** Use los círculos de colores indicados en la tabla a modo de ayuda.


COINCIDENCIA DE COLOR				
TAMAÑO DE BRIDA/ ACOPLAMIENTO LA BRIDA	0 - 9/10" (0-23mm)	1/5 - 1 1/4" (4.8-31mm)	1 1/4" (32mm)*	1 3/4" (45mm)*

*Indica la medición del tamaño de la brida.

SISTEMA DE OSTOMÍA DE DOS PIEZAS LITTLE ONES® EXTRAPEQUEÑO

Para bebés con un peso inferior a 10libras/4.5kg

BARRERA CUTÁNEA LITTLE ONES® EXTRAPEQUEÑA

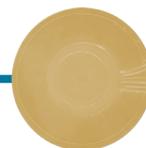

Para cortar a medida

- Stomahesive® (uso estándar)
- Adhesive Coupling Technology™
- Sin orificio inicial
- Cantidad = 5

HCPCS A4414

	Rango de corte	Sin collar de cinta
	0 - 9/10" (0-23mm)	411632

BOLSA LITTLE ONES® EXTRAPEQUEÑA

Drenable | Cierre de cola InvisiClose™



- Adhesive Coupling Technology™
- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 10

HCPCS A5063 | Sin filtro

	Tamaño del estoma	Transparente
	0 - 9/10" (0-23mm)	411631

SISTEMA DE OSTOMÍA DE UNA PIEZA LITTLE ONES® EXTRAPEQUEÑO

Para bebés con un peso inferior a 10libras/4.5kg

BOLSA LITTLE ONES® EXTRAPEQUEÑA

Para cortar a medida | Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Sin orificio inicial
- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 10



HCPCS A5061 | Sin filtro

Tamaño del estoma	Transparente
0 - 9/10" (0-23mm)	411633

SISTEMA DE OSTOMÍA DE DOS PIEZAS LITTLE ONES®

Sugerido para niños con un peso superior a 10libras/4.5kg

BARRERA CUTÁNEA LITTLE ONES®

Para cortar a medida

- Stomahesive® (uso estándar)
- Adhesive Coupling Technology™
- Cantidad = 5



HCPCS A4414

Rango de corte	Collar de cinta hidrocólido BLANCO	Sin collar de cinta
1/5 - 1 1/4" (4.8-31mm)	411642	411641

BOLSA LITTLE ONES®

Drenable | Cierre de cola InvisiClose™

- Adhesive Coupling Technology™
- Longitud de la bolsa = 8"
- Cantidad = 10




HCPCS A4425 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca
1/5 - 1 1/4" (4.8-31 mm)	411637	411638

BOLSA LITTLE ONES®

Extremo cerrado

- Adhesive Coupling Technology™
- Longitud de la bolsa = 6"
- Cantidad = 10

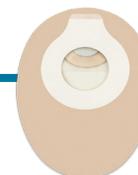

HCPCS A4419 | Con filtro (Se incluyen las cubiertas de filtro)

Tamaño del estoma	Transparente	Opaca
1/5 - 1 1/4" (4.8-31 mm)	411640	411639

BARRERA CUTÁNEA LITTLE ONES®

Para cortar a medida

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sistema de brida
- Cantidad = 5



HCPCS A4414

Tamaño de la brida	Rango de corte	Collar de cinta acrílico BLANCO
1 1/4" (32mm)	1/2 - 3/4" (13-19mm)	401925
1 3/4" (45mm)	1 1/8 - 1 1/4" (28-32mm)	401926

BOLSA LITTLE ONES®

Drenable | Cierre con clip

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sistema de brida
- Longitud de la bolsa = 6"
- 10 cierres de cola blandos, moldeables, por caja (diseñados para uso pediátrico)
- Cantidad = 10



HCPCS A5063 | Sin filtro

	Tamaño de la brida	Transparente
●	1 1/4" (32mm)	401927
●	1 3/4" (45mm)	401928

BOLSA LITTLE ONES®

Extremo cerrado

- Sistema de brida
- Longitud de la bolsa = 5"
- Cantidad = 20



HCPCS A5054 | Sin filtro

	Tamaño de la brida	Opaca
●	1 1/4" (32mm)	401930
●	1 3/4" (45mm)	401931

BOLSA LITTLE ONES®

Urostomía | Orificio de descarga plegable

- Sistema de brida
- Longitud de la bolsa = 6"
- 2 adaptadores de drenaje nocturno universales por caja
- Cantidad = 10



HCPCS A5073 | Sin filtro

	Tamaño de la brida	Transparente
●	1 1/4" (32mm)	401929

SISTEMA DE OSTOMÍA DE UNA PIEZA LITTLE ONES®

Sugerido para niños con un peso superior a 10 libras/4.5kg

BOLSA LITTLE ONES®

Para cortar a medida | Drenable | Cierre con clip

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 6"
- 15 cierres de cola blandos, moldeables, por caja (diseñados para uso pediátrico)
- Cantidad = 15



HCPCS A5061 | Sin filtro

Rango de corte	Transparente
5/16 - 2" (8-50mm)	020922

BOLSA LITTLE ONES®

Urostomía | Para cortar a medida | Orificio de descarga plegable

- Stomahesive® (uso estándar)
- Sin collar de cinta
- Longitud de la bolsa = 5"
- 2 adaptadores de drenaje nocturno universales por caja
- Cantidad = 15



HCPCS A5071

Rango de corte	Transparente
5/16 - 1" (8-25mm)	020917

ACCESORIOS



PREPARACIÓN DE LA PIEL

Soluciones que favorecen la salud de la piel al reducir la irritación y el daño.

Cómo elegir los accesorios adecuados

No importa si está buscando mayor protección para la piel o más seguridad para su sistema de ostomía, con la combinación correcta de accesorios, podrá sentirse más cómodo y tranquilo.



Preparación de la piel



Apoyo para la bolsa



Más seguridad



Extracción de la bolsa



SENSI-CARE™

Toallita de barrera sin ardor

- Diseñada para crear una capa protectora que protege la piel del daño
- Ayuda a reducir la abrasión y la irritación de la piel causadas por los desechos corporales
- Puede ayudar a aumentar el contacto o la adherencia a la piel
- A base de silicona
- Sin alcohol
- Compatible con CHG¹⁷

HCPCS A5120

Líquido por toallita	Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
3 ml	413501	30	20

*Se venden por paquete.

SENSI-CARE™

Atomizador de barrera sin ardor

- Diseñado para crear una capa protectora que protege la piel del daño
- Ayuda a reducir la abrasión y la irritación de la piel causadas por los desechos corporales
- Puede ayudar a aumentar el contacto o la adherencia a la piel
- A base de silicona
- Sin alcohol
- Sin aerosol
- Compatible con CHG¹⁷



HCPCS A4369

Tamaño del frasco atomizador	Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
28 ml	420797	1	12
50 ml	413502	1	12

*Se venden por paquete.

SENSI-CARE™

Aplicador de espuma de barrera sin ardor

- Diseñado para crear una capa protectora que protege la piel del daño
- Ayuda a reducir la abrasión y la irritación de la piel causadas por los desechos corporales
- Puede ayudar a aumentar el contacto o la adherencia a la piel
- A base de silicona
- Sin alcohol
- Compatible con CHG¹⁷



HCPCS A5120 | Estéril

Tamaño del aplicador	Código del producto	Aplicadores en envase individual por caja	Cajas por paquete*
1 ml	420793	5	20
1 ml	420794	25	4
3 ml	420795	5	20
3 ml	420796	25	4

*Se venden por paquete.

ALLKARE®

Toallita de barrera protectora

- Diseñado para crear una capa protectora que protege la piel del daño
- Ayuda a reducir la abrasión y la irritación de la piel causadas por los desechos corporales
- Puede ayudar a aumentar el contacto o la adherencia a la piel
- Contiene alcohol



HCPCS A5120

Código del producto	Caja de
037439	50
037444	100

STOMAHESIVE®

Talco protector

- Absorbe el exceso de humedad para proteger la piel irritada
- Para usar en piel que supura alrededor de un estoma
- Espolvorear ligeramente el talco sobre la zona afectada y retirar el exceso. Luego, se puede aplicar una toallita o atomizador de barrera cutánea



HCPCS A4371

Tamaño	Código del producto	Caja de
1 onza	025510	1 frasco



APOYO PARA LA BOLSA

Productos que ayudan a crear el mejor calce alrededor del estoma, evitar las fugas y ayudar a nivelar la zona de la superficie de aplicación para que funcione mejor la bolsa.

EAKIN COHESIVE®

Sellos

- Barrera moldeable que ayuda a sellar la zona alrededor de estomas de calce difícil para evitar fugas por debajo de la barrera cutánea
- Actúa como relleno sobre las superficies desparejas para ayudar a crear una zona más plana para que se adhiera la barrera cutánea
- Diseñados para absorber la humedad e impedir que entre en contacto con la piel y la dañe, forman un gel que protege la piel.



HCPCS A4385

Tamaño	Código del producto	Profundidad	Caja de
Pequeño 2"	839002	4.2 mm	20
Delgados 2"	839005	3 mm	10
Grande 4"	839001	2.1 mm	10
StomaWrap 3 1/3"	839006	3 mm	10

STOMAHESIVE®

Pasta

- Ayuda a proteger la piel expuesta entre la base del estoma y la abertura de la barrera cutánea. También puede usarse para rellenar grietas, pliegues de la piel y cicatrices para ayudar a crear una superficie plana para lograr una fijación óptima del dispositivo.
- Ayuda a prevenir fugas por debajo de la barrera cutánea que pueden degradar la piel.
- A base de pectina
- Contiene alcohol



HCPCS A4406

Tamaño	Código del producto	Caja de
2 onzas	183910	1 tubo

EAKIN COHESIVE®

Pasta

- Se usa para rellenar grietas, pliegues de la piel y cicatrices para ayudar a crear una superficie pareja para la bolsa.
- Impide las fugas al formar una barrera impermeable alrededor del estoma.
- Sin alcohol



HCPCS A4405

Tamaño	Código del producto	Caja de
2.1 onzas	839010	1 tubo

STOMAHESIVE®

Barrera cutánea

- Ayuda a rellenar zonas desparejas de la piel para crear una superficie plana para lograr una fijación óptima del dispositivo.
- Diseñada para ayudar a proteger la piel del contacto con los líquidos corporales
- Gran superficie de corte para adaptarse a estomas grandes e inflamados
- La barrera cutánea Stomahesive® estéril se puede usar después de una cirugía



HCPCS A4362

Tamaño	Código del producto	Caja de
4 x 4"	021712	5
4 x 4 (Estéril)	021901	5

HCPCS A5122

Tamaño	Código del producto	Caja de
8 x 8"	021715	3

EAKIN COHESIVE®

Barrera cutánea

- Diseñada para ayudar a proteger la piel del contacto con los líquidos corporales
- Actúa como relleno en zonas desparejas de la piel para crear una superficie plana para lograr una fijación óptima del dispositivo.
- Es moldeable y absorbe la humedad



HCPCS A4385

Tamaño	Código del producto	Caja de
4 x 4"	839004	5
4 x 8"	839003	5

STOMAHESIVE®

Tiras

- Ayudan a crear un sello seguro entre el estoma y el dispositivo para proteger la piel de los desechos de salida del estoma.
- Se pueden cortar, rasgar y moldear de distintas formas para ayudar a impedir las pérdidas alrededor del estoma al actuar como relleno.
- Diseñadas para absorber la humedad del estoma y ayudar a crear un calce ceñido alrededor del estoma.



HCPCS A4362

Tamaño	Código del producto	Caja de
3 tarjetas de 5 tiras cada una	025542	15 tiras

SUR-FIT® NATURA™

Insertos convexos desechables

- Los insertos convexos se pueden agregar a una barrera cutánea plana para crear una convexidad superficial. Se colocan dentro del diámetro interno de la brida de plástico de una barrera cutánea SUR-FIT® Natura™ Durahesive® o Stomahesive® en el lado que queda contra la bolsa.
- Seleccione un inserto que sea al menos ¼" más grande que el diámetro máximo del estoma.
- Solo para barreras cutáneas SUR-FIT® Natura™. No se deben usar con las barreras cutáneas ConvaTec Moldable Technology™ ni con ningún otro producto.
- Cantidad = 5



HCPCS A5093

	Para usar con tamaño de brida	Ancho máximo del estoma	Tamaño de la abertura del inserto convexo	Código del producto
●	1 1/2" (38mm)	1/2"	3/4" (19mm)	404006
●	1 1/2" (38mm)	3/4"	1" (25mm)	404008
●	1 3/4" (45mm)	7/8"	1 1/8" (29mm)	404009
●	1 3/4" (45mm)	1"	1 1/4" (32mm)	404010
●	1 3/4" (45mm)	1 1/8"	1 3/8" (35mm)	404011
●	2 1/4" (57mm)	1 1/4"	1 1/2" (38mm)	404012
●	2 1/4" (57mm)	1 3/8"	1 5/8" (41mm)	404013



MÁS SEGURIDAD

Un nivel extra de protección para mantener el sistema de ostomía en su lugar.

EASE™



Tiras

- Ayudan a mantener la barrera cutánea en su lugar.
- Se pueden aplicar para cubrir los bordes de la barrera cutánea.
- Tienen un diseño delgado y flexible.
- Son resistentes al agua.

HCPCS A4362 (4 tiras = 1 unidad facturable de A4362)

Tamaño	Código del producto	Cantidad
1 1/5 x 3 1/2" (3 x 9cm)	422163	80 tiras

CONVATEC®

Cinturón para ostomía

- Se usa para ayudar a mantener el sistema de ostomía en su lugar.

HCPCS A4367

Tamaño	Código del producto	Caja de
Ajustable hasta 42"	175507	1

DIAMONDS™

Sachets para gelificación y control del olor

- Gelifican el contenido líquido.
- Ayudan a reducir o eliminar el exceso de gases que puede generar que la bolsa se infle.
- Contienen carbón activado que ayuda a eliminar los olores.



HCPCS A4422

Código del producto	Caja de
TR105	100 sachets

DUOLOCK™

Cierre de cola curva

- Ayuda a asegurar el extremo de la bolsa drenable ConvaTec®.

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175652	10

CONVATEC®

Cierre de cola

- Ayuda a asegurar el extremo de la bolsa drenable ConvaTec®.

HCPCS A4363

Código del producto	Caja de
175635	10

CONVATEC®

Conjunto de recipiente para drenaje nocturno*

- Recipiente plástico para la recolección de orina durante la noche
- Recipiente con capacidad de 2000 cc/ml
- Es reutilizable, se puede lavar entre usos.



HCPCS A5102

Código del producto	Cantidad
027060	1 conjunto

*Contiene: 1 recipiente para drenaje nocturno ConvaTec® con tubo, 1 tapa de recipiente para drenaje nocturno ConvaTec® y 1 adaptador universal

CONVATEC®

Tubo de recipiente para drenaje nocturno

- Tubo de repuesto para el recipiente para drenaje nocturno ConvaTec®



HCPCS A4331

Código del producto	Caja de
027062	1



EXTRACCIÓN DE LA BOLSA

Soluciones que favorecen la salud de la piel al protegerla de la irritación y el daño que provocan los adhesivos.

SENSI-CARE™

Toallita para limpiar adhesivos sin ardor

- Diseñada para quitar los residuos de adhesivo de la piel
- El uso con cada cambio de dispositivo ayuda a prevenir la acumulación de residuos.
- A base de silicona
- Sin alcohol
- Compatible con CHG¹⁷



HCPCS A4456

Líquido por toallita	Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
3 ml	413500	30	20

*Se venden por paquete.

SENSI-CARE™

Atomizador para liberar adhesivos sin ardor

- Pasa entre el adhesivo y la piel, liberando suavemente el adhesivo, la cinta o el dispositivo.
- Ayuda a minimizar la dolorosa abrasión de la piel al quitar el adhesivo.¹⁸
- A base de silicona
- Sin alcohol
- Sin aerosol
- Compatible con CHG¹⁷



HCPCS A4455

Tamaño del frasco atomizador	Código del producto	Caja de	Cajas por paquete*
50 ml	413499	1	12
150 ml	420798 (Estéril)	1	12

*Se venden por paquete.

ALLKARE®

Toallita para limpiar adhesivos

- Ayuda a quitar suavemente los adhesivos, además de las barreras cutáneas, las cintas y los vendajes hidrocoloideos.
- Contiene alcohol



HCPCS A4456

Código del producto	Caja de
037436	50
037443	100

IRRIGACIÓN

VISI-FLOW®

Irrigador con cono para estoma



HCPCS A4398 & A4399

Código del producto

Caja de

401989

1

VISI-FLOW®

Manga de irrigación

- Compatible con barreras cutáneas Natura™ y SUR-FIT® Natura™
- Color: Transparente
- 1 cierre de cola por caja
- Cantidad = 5



HCPCS A4397

Tamaño de la brida

Código del producto

●	1 1/2" (38mm)	401911
●	1 3/4" (45mm)	401912
●	2 1/4" (57mm)	401913
●	2 3/4" (70mm)	401914

VISI-FLOW®

Cono para estoma



HCPCS A4399

Código del producto

Caja de

022736

1

VISI-FLOW®

Cierre de cola para manga de irrigación



HCPCS A4363

Código del producto

Caja de

175650

10

VISI-FLOW®

Placa frontal de adaptador de irrigación



- Compatible con barreras cutáneas Natura™ y SUR-FIT® Natura™
- Cantidad = 1

HCPCS A4361

Tamaño de la brida


Código del producto

●	1 3/4" (45mm)	401918
●	2 3/4" (70mm)	401919

eakin®

Bolsas para HERIDAS Y FÍSTULAS

Las bolsas para heridas Eakin pueden ayudar a contener fístulas y manejar las heridas exudativas. Las opciones de bolsas incluyen la capacidad de conectar tubos para drenaje remoto, o la opción de pliegue y cierre con encastre.

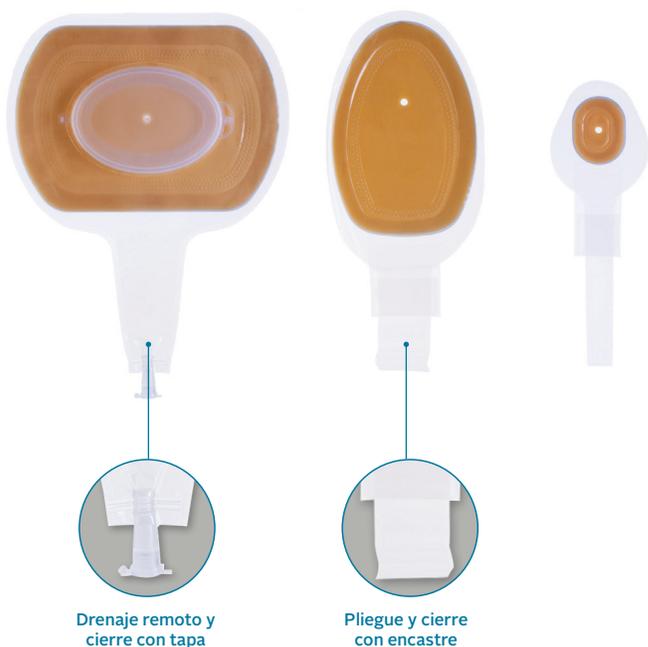

Drenaje remoto y cierre con tapa

Pliegue y cierre con encastre

EAKIN®

Bolsa para heridas (área de corte de 1.2 x 1.8")

- Cantidad = 10

HCPCS A6154

Rango de corte

Pliegue y cierre con encastre

1.2 x 1.8" (3 x 4.5cm)

839250



EAKIN®

Bolsa para heridas (área de corte de 3.14 x 2.4")

- Cantidad = 10

HCPCS A6154

Rango de corte

Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa

3.14 x 2.4" (8 x 6.1cm)

839267



EAKIN®

Bolsa para heridas (área de corte de 3.0 x 4.3")

- Cantidad = 10

HCPCS A6154

Rango de corte

Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa

Pliegue y cierre con encastre

3.0 x 4.3" (7.6 x 10.9cm)

839261

839251



EAKIN®

Bolsa para heridas (área de corte de 4.3 x 6.9")

- Cantidad = 10

HCPCS A6154

Rango de corte

Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa

Pliegue y cierre con encastre

4.3 x 6.9" (10.9 x 17.5cm)

839262

839252



EAKIN®

Bolsa para heridas de corte horizontal (área de corte de 9.7 x 6.3")

- Cantidad = 5



HCPCS A6154

Rango de corte	Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa con ventana de acceso	Pliegue y cierre con encastre
9.7 x 6.3" (24.6 x 16cm)	839264	839253

EAKIN®

Bolsa para heridas de corte vertical (área de corte de 6.3 x 9.7")

- Cantidad = 5



HCPCS A6154

Rango de corte	Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa	Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa con ventana de acceso
6.3 x 9.7" (16 x 24.6cm)	839265	839268

EAKIN®

Bolsa para heridas de corte vertical (área de corte de 5.1 x 11.4")

- Cantidad = 5



HCPCS A6154

Rango de corte	Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa
5.1 x 11.4" (13 x 29cm)	839266

EAKIN®

Ventana de acceso Eakin

- Se puede agregar a las bolsas para heridas y fístulas Eakin para tener acceso a la herida al instante (*se puede usar con 839252, 839253, 839262, 839263, 839265, 839266*).
- Cantidad = 5



HCPCS N/A

Tamaño	Accesorio para drenaje remoto y cierre con tapa
N/C	839280

PRODUCTOS DISCONTINUADOS

LOS NÚMEROS DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS HAN CAMBIADO.†

Hemos realizado cambios en nuestra línea de productos

- A algunas bolsas tradicionales se les ha incorporado nuestra tecnología más novedosa.
- Proporcionamos referencias cruzadas (*véanse las tablas siguientes*) para relacionar los productos discontinuados con los productos que mejor los reemplazan.

Use esta guía para identificar los números de los productos que se han actualizado con las bolsas + o que se han discontinuado. El signo  indica que estos productos cuentan con la tecnología de bolsa +. Otras modificaciones indicadas en las tablas incluyen: tecnología de filtros ConvaTec, cantidades por paquete, longitudes de las bolsas, color, adhesivo, mayores áreas de corte y orificios precortados.

Guía de colores y tamaños de Natura™ +

COINCIDENCIA DE COLOR						
TAMAÑO DE LA BRIDA	1 1/4" (32mm)	1 1/2" (38mm)	1 3/4" (45mm)	2 1/4" (57mm)	2 3/4" (70mm)	4" (100mm)

Guía de colores y tamaños de Esteem Synergy®+

COINCIDENCIA DE COLOR				
TAMAÑO DE ACOPLAMIENTO	Abertura de estoma pequeña	Abertura de estoma mediana	Abertura de estoma grande	Abertura de estoma extragrande

† Solo los productos de los números mencionados se actualizaron con la tecnología de bolsas +. Los productos que no aparecen en la lista no han tenido modificaciones.

Anterior N.º de SKU	Anterior Cantidad	Nuevo N.º de SKU	Nuevo Cantidad	Tamaño de la brida o el estoma	Diferencias	N.º de página de SKU nuevo
125352	10	175777	5	19 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125353	10	175778	5	22 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125354	10	175779	5	25 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125355	10	175780	5	28 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125356	10	175781	5	32 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125357	10	175782	5	35 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125358	10	175783	5	35 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
125359	10	175784	5	45 mm	Cambio de tamaño del paquete	56
175761	15	416700	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado	50
175762	15	416703	30	25 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
175763	15	416706	30	35 mm	⊕ Orificio precortado 3 mm más grande Stomahesive® modificado	52
175764	15	416712	30	40 mm	⊕ Orificio precortado 2 mm más grande Stomahesive® modificado	52
175765	15	421823	30	50 mm	⊕ Orificio precortado 5 mm más grande Opaco Stomahesive® modificado	52
175766	15	421823	30	50 mm	⊕ Opaco Stomahesive® modificado	52
175768	15	421821	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado	50
175769	15	421687	30	25 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
175770	15	421689	30	30 mm	⊕ Orificio precortado 3 mm más grande Stomahesive® modificado	52
175771	15	421822	30	40 mm	⊕ Orificio precortado 2 mm más grande Stomahesive® modificado	52
175772	15	421823	30	50 mm	⊕ Orificio precortado 5 mm más grande Stomahesive® modificado	52
175773	15	421823	30	50 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
401521	30	421679	30	● Brida de 38 mm	⊕	37
401525	30	421678	30	● Brida de 38 mm	⊕	37
401529	30	421677	30	● Brida de 32 mm	⊕ Aumento de la longitud de 5" a 8"	37
401530	20	421679	30	● Brida de 38 mm	⊕ Aumento de la longitud de 5" a 8"	37
401531	20	421796	30	● Brida de 45 mm	⊕ Aumento de la longitud de 5" a 6" Con filtro HCPCS ahora es A4419	38
401532	20	421797	30	● Brida de 57 mm	⊕ Aumento de la longitud de 5" a 6" Con filtro HCPCS ahora es A4419	38
401916	1	Ver notas		● Brida de 45 mm	Componentes para irrigación disponibles por separado	
401917	1	Ver notas		● Brida de 70 mm	Componentes para irrigación disponibles por separado	
401920	5	416919	5	● Brida de 45 mm	Kit actualizado con nuestro sistema de cierre InvisiClose mejorado	60
401921	5	416927	5	● Brida de 70 mm	Kit actualizado con nuestro sistema de cierre InvisiClose mejorado	60
401922	5	416929	5	● Brida de 100 mm	Kit actualizado con nuestro sistema de cierre InvisiClose mejorado	60
401993	10	Ninguna		● Brida de 45 mm	Consulte nuestra línea de productos en acordeón con apoyo de poca presión.	
401994	10	Ninguna		● Brida de 57 mm	Consulte nuestra línea de productos en acordeón con apoyo de poca presión.	
401995	10	Ninguna		● Brida de 70 mm	Consulte nuestra línea de productos en acordeón con apoyo de poca presión.	
401996	10	Ninguna		● Brida de 100 mm	Discontinuado	
402239	5	416923	5	● Brida de 57 mm	Kit actualizado con nuestro sistema de cierre InvisiClose mejorado	60
404007	5	413180	10	● Brida de 38 mm	Consulte nuestra línea convexa ampliada.	30
405406	10	Ver notas		● Extragrande	Discontinuado. Pruebe la bolsa con oblea Natura™ de 100 mm.	
405483	10	Ver notas		● Extragrande	Discontinuado. Pruebe la bolsa con oblea Natura™ de 100 mm.	
409275	5	416929	5	● Brida de 100 mm	Kit actualizado con nuestro sistema de cierre InvisiClose mejorado	60
411309	20	416415	10	● Brida de 38 mm	⊕	34
411312	20	416423	10	● Brida de 70 mm	⊕	34
413141	60	421821	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado	50

N.º de SKU anterior	Cantidad anterior	N.º de SKU nuevo	Cantidad nueva	Tamaño de la brida o el estoma	Diferencias	N.º de página de SKU nuevo
413142	60	421687	30	25 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
413143	60	421689	30	35 mm	⊕ Orificio precortado 3 mm más grande Stomahesive® modificado	52
413144	60	421822	30	40 mm	⊕ Orificio precortado 2 mm más grande Stomahesive® modificado	52
413145	60	421823	30	50 mm	⊕ Orificio precortado 5 mm más grande Stomahesive® modificado	52
413146	60	421823	30	50 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
413147	60	416700	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado	50
413148	60	416703	30	25 mm	⊕ Stomahesive® modificado	52
413149	60	416706	30	35 mm	⊕ Orificio precortado 3 mm más grande Stomahesive® modificado	52
413150	60	416712	30	40 mm	⊕ Orificio precortado 2 mm más grande Stomahesive® modificado	52
413151	60	421823	30	50 mm	⊕ Orificio precortado 5 mm más grande Opaco Stomahesive® modificado	52
413152	60	421823	30	50 mm	⊕ Opaco Stomahesive® modificado	52
413169	60	421679	30	● Brida de 38 mm	⊕	37
413172	60	421893	30	● Brida de 70 mm	⊕	37
413173	60	421678	30	● Brida de 38 mm	⊕	37
413176	60	421798	30	● Brida de 70 mm	⊕	37
413335	20	421739	10	● Brida de 57 mm	⊕	34
413336	20	421740	10	● Brida de 70 mm	⊕	34
413435	10	421074	10	● Brida de 32 mm	Disminución de la longitud de 10" a 9"	40
413436	10	Ninguna		● Brida de 38 mm	Discontinuado	
413511	30	Ninguna		40-50 mm	Discontinuado	
416400	30	421676	30	● Brida de 32 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416401	30	421677	30	● Brida de 32 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416402	30	421677	30	● Brida de 32 mm	⊕ Aumento de la longitud de 6" a 8" Ahora con filtro	37
416404	30	421679	30	● Brida de 38 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416405	30	421679	30	● Brida de 38 mm	⊕ Aumento de la longitud de 6" a 8" Ahora con filtro	37
416407	30	421681	30	● Brida de 45 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416408	30	421796	30	● Brida de 45 mm	⊕ Ahora con filtro HCPCS ahora es A4419	38
416410	30	421683	30	● Brida de 57 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416411	30	421797	30	● Brida de 57 mm	⊕ Ahora con filtro HCPCS ahora es A4419	38
416413	30	421893	30	● Brida de 70 mm	⊕ Mejorado con ventana de visualización	37
416702	30	421816	30	20-70 mm	⊕	50
416780	30	416781	30	● Mediano	Opaca	44
416797	10	416795	10	● Pequeño	Ahora con filtro HCPCS ahora es A4425	43
416900	10	416798	10	● Mediano	Ahora con filtro HCPCS ahora es A4425	43
421075	10	Ninguna		● Brida de 38 mm	Discontinuado	
421076	10	413437	10	● Brida de 45 mm	Aumento de la longitud de 9" a 10"	40
421612	30	Ninguna		20-25 mm	Discontinuado	
421613	30	Ninguna		20-35 mm	Discontinuado	
421614	30	Ninguna		20-43 mm	Discontinuado	
650408	30	421821	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado	50
650422	30	416700	30	20-70 mm	⊕ Mayor área de corte Stomahesive® modificado Sin collar de cinta	50
839260	10	839267	10	4.3 x 3"	Versión apenas más grande	88
839263	5	839265	5	9.7 x 6.3"	Orientación vertical	89

RECURSOS Y APOYO RELACIONADOS CON LA OSTOMÍA

para su paciente

ConvaTec

ConvaTec es una empresa internacional dedicada a las tecnologías y los productos médicos; lleva casi 40 años desarrollando productos y soluciones para ostomía.

Número gratuito: 1-800-422-8811
www.convatec.com/ostomy

Ostomysecrets®

Una empresa de ConvaTec que ofrece una línea completa, elegante y funcional de ropa interior, trajes de baño y accesorios diseñados para sostener su sistema de ostomía.

Número gratuito: 1-877-613-6246
www.ostomysecrets.com

me+™

Apoyo, perspectivas e información de productos para personas que viven con una ostomía. Inscribirse en me+ es rápido, fácil y gratis.

Número gratuito: 1-800-422-8811
Correo electrónico:
CIC@convatec.com
www.mepluscare.com

OTROS RECURSOS RELACIONADOS CON LA OSTOMÍA

The United Ostomy Associations of America (UOAA)

Organización estadounidense de alcance nacional que ofrece apoyo, información y defensoría.

Número gratuito:
1-800-826-0826
www.ostomy.org

American Cancer Society

Organización estadounidense comunitaria y voluntaria de atención médica con alcance nacional.

Número gratuito:
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

Wound Ostomy Continence Nurses Society™ (WOCN®)

Sociedad de enfermería profesional que se dedica a ofrecer atención médica especializada a personas con inquietudes sobre heridas, ostomía y continencia.

Número gratuito: 1-888-224-9626
www.wocn.org

Crohn's & Colitis Foundation of America

Organización sin fines de lucro, manejada por voluntarios, que se dedica a hallar una cura para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Número gratuito: 1-800-932-2423
www.cffa.org

HCPCS	Descripción de HCPCS	Cantidad máxima habitual de Medicare
A4331	Tubo extensor para drenaje	1 cada 6 meses
A4361	Placa frontal para ostomía	3 cada 6 meses
A4362	Barrera cutánea, sólida, 4 x 4 o equivalente	20 por mes
A4363	Grapa para ostomía, de cualquier tipo, solo de reemplazo	Según sea necesario
A4367	Cinturón para ostomía	1 por mes
A4369	Líquido de barrera cutánea para ostomía (atomizador o cepillo)	2 onzas por mes
A4371	Talco de barrera cutánea para ostomía	10 onzas cada 6 meses
A4385	Barrera cutánea, sólida, 4 x 4 o equivalente, uso prolongado	Según sea necesario
A4388	Bolsa drenable con barrera de uso prolongado incorporada	Según sea necesario
A4389	Bolsa de ostomía drenable con barrera incorporada y convexidad integrada, con filtro (1 pieza)	20 por mes
A4390	Bolsa drenable con barrera de uso prolongado incorporada, con convexidad	Según sea necesario
A4392	Bolsa de urostomía con barrera incorporada y convexidad integrada (1 pieza)	20 por mes
A4393	Bolsa de urostomía con barrera de uso prolongado incorporada y convexidad integrada (1 pieza)	20 por mes
A4397	Manga de irrigación	4 por mes
A4398	Bolsa de irrigación para ostomía	2 cada 6 meses
A4399	Cono/catéter de irrigación para ostomía, con cepillo	2 cada 6 meses
A4402	Lubricante	4 onzas por mes
A4405	Barrera cutánea para ostomía, sin base de pectina, en pasta	4 onzas por mes
A4406	Barrera cutánea para ostomía, a base de pectina, en pasta	4 onzas por mes
A4407	Barrera cutánea con brida, de uso prolongado, con convexidad	Según sea necesario
A4409	Barrera cutánea con brida, de uso prolongado, <= 4 x 4	Según sea necesario
A4410	Barrera cutánea con brida, de uso prolongado, > 4 x 4	Según sea necesario
A4413	Bolsa drenable de gran capacidad para barrera con brida	Según sea necesario
A4414	Barrera cutánea con brida, <= 4 x 4	20 por mes
A4415	Barrera cutánea con brida, > 4 x 4	20 por mes
A4416	Bolsa cerrada con barrera incorporada, con filtro	60 por mes
A4417	Bolsa de ostomía cerrada con barrera incorporada y convexidad integrada, con filtro (1 pieza)	60 por mes
A4419	Bolsa cerrada para usar con barrera con brida, con filtro	60 por mes
A4421	Suministros para ostomía, varios	Según sea necesario
A4422	Material absorbente para ostomía (hoja, almohadilla, paquete de cristales)	Sin cargo
A4424	Bolsa de ostomía drenable con barrera incorporada, con filtro (1 pieza)	20 por mes
A4425	Bolsa drenable con filtro para usar con brida	20 por mes
A4428	Bolsa urinaria con barrera de uso prolongado, con orificio de descarga tipo grifo	Según sea necesario
A4432	Bolsa urinaria para usar en barrera con brida, con orificio de descarga tipo grifo	20 por mes
A4455	Limpiador o disolvente para adhesivos	2 onzas por mes
A4456	Toallitas para limpiar adhesivos, cualquier tipo	50 por mes
A5054	Bolsa cerrada para barrera con brida	60 por mes
A5055	Tapón para estoma, unidad	31 por mes
A5056	Bolsa drenable con barrera de uso prolongado incorporada, con filtro	40 por mes
A5057	Bolsa drenable con barrera de uso prolongado incorporada con convexidad, con filtro	40 por mes
A5061	Bolsa drenable con barrera incorporada	20 por mes
A5063	Bolsa drenable para usar con brida	20 por mes
A5071	Bolsa urinaria con barrera incorporada	20 por mes
A5073	Bolsa urinaria para barrera con brida	20 por mes
A5093	Accesorio para ostomía, inserto convexo	10 por mes
A5102	Recipiente de drenaje para la cama, con o sin tubo, rígido o expansible	2 cada 6 meses
A5120	Barrera cutánea, toallitas, unidad	150 cada 6 meses
A5122	Barrera cutánea, sólida, 8 x 8 o equivalente	20 por mes
A6154	Bolsa para heridas	Según sea necesario

020917.....	74	125352.....	91	401525.....	91	404007.....	91
020922.....	74	125353.....	91	401526.....	38	404008.....	80
021712.....	79	125354.....	91	401527.....	38	404009.....	80
021715.....	79	125355.....	91	401528.....	38	404010.....	80
021901.....	79	125356.....	91	401529.....	91	404011.....	80
022355.....	66	125357.....	91	401530.....	91	404012.....	80
022356.....	66	125358.....	91	401531.....	91	404013.....	80
022736.....	85	125359.....	91	401532.....	91	404014.....	36
022750.....	56	125361.....	58	401533.....	40	404015.....	36
022751.....	56	125362.....	58	401534.....	40	404016.....	36
022752.....	56	125363.....	58	401535.....	40	404017.....	36
022753.....	56	125364.....	58	401536.....	40	404018.....	36
022754.....	56	125365.....	58	401537.....	40	404025.....	36
022755.....	56	125366.....	58	401538.....	40	404026.....	36
022756.....	56	125367.....	58	401539.....	40	404027.....	36
022757.....	56	125368.....	58	401540.....	40	404028.....	36
022758.....	56	125369.....	58	401541.....	40	404029.....	36
022759.....	56	175507.....	81	401542.....	39	404030.....	35
022760.....	56	175611.....	57	401543.....	39	404031.....	35
022761.....	56	175635.....	82	401544.....	39	404032.....	35
022762.....	56	175650.....	86	401545.....	39	404033.....	35
022763.....	56	175652.....	82	401546.....	39	404034.....	35
022764.....	56	175761.....	91	401547.....	39	404592.....	30
022765.....	56	175762.....	91	401548.....	39	404593.....	30
022766.....	56	175763.....	91	401549.....	39	404594.....	30
022767.....	56	175764.....	91	401550.....	39	405406.....	91
022768.....	56	175765.....	91	401551.....	39	405446.....	44
022769.....	56	175766.....	91	401552.....	39	405447.....	44
022770.....	56	175768.....	91	401553.....	39	405448.....	44
022771.....	55	175769.....	91	401554.....	39	405449.....	44
025433.....	55	175770.....	91	401555.....	39	405450.....	44
025510.....	77	175771.....	91	401557.....	37	405451.....	44
025542.....	80	175772.....	91	401558.....	37	405452.....	44
027060.....	82	175773.....	91	401559.....	37	405453.....	44
027062.....	82	175777.....	56	401573.....	31	405456.....	41
037436.....	84	175778.....	56	401574.....	31	405457.....	41
037439.....	77	175779.....	56	401575.....	31	405458.....	41
037443.....	84	175780.....	56	401576.....	31	405467.....	41
037444.....	77	175781.....	56	401577.....	31	405468.....	41
064927.....	58	175782.....	56	401905.....	27	405473.....	42
125257.....	31	175783.....	56	401906.....	31	405474.....	42
125258.....	31	175784.....	56	401909.....	39	405475.....	42
125259.....	31	175785.....	56	401911.....	85	405476.....	42
125260.....	31	175790.....	58	401912.....	85	405477.....	42
125261.....	31	175791.....	58	401913.....	85	405478.....	42
125262.....	31	175792.....	58	401914.....	85	405479.....	42
125263.....	31	175793.....	58	401916.....	91	405480.....	42
125264.....	31	175794.....	58	401917.....	91	405481.....	42
125265.....	31	175795.....	58	401918.....	86	405482.....	42
125266.....	31	175796.....	58	401919.....	86	405483.....	41
125267.....	32	175797.....	58	401920.....	91	409268.....	42
125268.....	32	175798.....	58	401921.....	91	409269.....	42
125269.....	32	183910.....	78	401922.....	91	409270.....	42
125270.....	32	400598.....	55	401923.....	68	409275.....	91
125271.....	32	400599.....	55	401924.....	68	411264.....	36
125272.....	32	401500.....	36	401925.....	72	411265.....	36
125273.....	32	401501.....	36	401926.....	72	411266.....	36
125274.....	32	401502.....	36	401927.....	73	411267.....	36
125275.....	32	401503.....	36	401928.....	73	411288.....	36
125276.....	32	401504.....	36	401929.....	73	411289.....	36
125277.....	32	401505.....	35	401930.....	73	411290.....	36
125330.....	55	401506.....	35	401931.....	73	411291.....	36
125331.....	56	401507.....	35	401932.....	36	411292.....	36
125333.....	56	401508.....	35	401933.....	36	411309.....	91
125334.....	56	401509.....	35	401934.....	36	411310.....	35
125335.....	56	401510.....	36	401935.....	36	411311.....	35
125336.....	56	401511.....	36	401936.....	36	411312.....	91
125337.....	56	401512.....	36	401989.....	85	411360.....	35
125338.....	56	401513.....	36	401993.....	91	411361.....	35
125339.....	56	401514.....	36	401994.....	91	411362.....	35
125340.....	56	401515.....	36	401995.....	91	411489.....	36
125341.....	56	401521.....	91	401996.....	91	411490.....	36
125342.....	56	401522.....	38	402239.....	91	411491.....	36
125343.....	56	401523.....	38	403948.....	41	411492.....	36
125344.....	56	401524.....	38	404006.....	80	411493.....	36

411631.....	70	413418.....	29	416733.....	48	421034.....	33
411632.....	70	413419.....	29	416736.....	48	421035.....	33
411633.....	71	413420.....	29	416737.....	48	421039.....	28
411637.....	72	413421.....	33	416738.....	49	421040.....	28
411638.....	72	413422.....	33	416739.....	49	421041.....	28
411639.....	72	413423.....	33	416740.....	49	421042.....	63
411640.....	72	413424.....	33	416741.....	49	421043.....	63
411641.....	71	413435.....	93	416742.....	49	421044.....	63
411642.....	71	413436.....	93	416743.....	49	421045.....	62
411657.....	41	413437.....	40	416744.....	49	421046.....	62
411658.....	41	413438.....	40	416745.....	49	421047.....	62
411659.....	41	413439.....	40	416746.....	49	421074.....	40
411800.....	29	413499.....	83	416747.....	49	421075.....	93
411801.....	33	413500.....	83	416748.....	49	421076.....	93
411802.....	29	413501.....	76	416749.....	49	421454.....	28
411803.....	33	413502.....	76	416750.....	49	421456.....	32
411804.....	29	413509.....	52	416751.....	49	421458.....	28
411805.....	33	413510.....	52	416774.....	43	421460.....	32
411806.....	29	413511.....	93	416775.....	43	421462.....	28
411807.....	33	413515.....	48	416776.....	44	421464.....	32
413141.....	91	413516.....	48	416777.....	44	421612.....	93
413142.....	93	413517.....	48	416778.....	43	421613.....	93
413143.....	93	413518.....	48	416779.....	43	421614.....	93
413144.....	93	413519.....	48	416780.....	93	421615.....	49
413145.....	93	413520.....	48	416781.....	44	421616.....	49
413146.....	93	413521.....	48	416782.....	43	421617.....	49
413147.....	93	413522.....	48	416783.....	43	421618.....	49
413148.....	93	413523.....	48	416795.....	43	421619.....	49
413149.....	93	416400.....	93	416796.....	43	421620.....	49
413150.....	93	416401.....	93	416797.....	93	421621.....	49
413151.....	93	416402.....	93	416798.....	43	421622.....	49
413152.....	93	416403.....	37	416799.....	43	421623.....	53
413153.....	27	416404.....	93	416900.....	93	421624.....	53
413154.....	27	416405.....	93	416901.....	43	421625.....	53
413155.....	27	416406.....	37	416902.....	43	421626.....	53
413156.....	27	416407.....	93	416903.....	43	421627.....	53
413157.....	27	416408.....	93	416908.....	47	421628.....	53
413159.....	27	416409.....	37	416915.....	67	421629.....	53
413160.....	27	416410.....	93	416916.....	67	421631.....	53
413161.....	27	416411.....	93	416917.....	61	421638.....	29
413162.....	27	416412.....	37	416918.....	61	421639.....	29
413163.....	27	416413.....	93	416919.....	29	421640.....	29
413164.....	27	416414.....	34	416920.....	60	421641.....	29
413165.....	27	416415.....	34	416921.....	61	421642.....	29
413166.....	27	416416.....	34	416922.....	61	421643.....	29
413167.....	27	416417.....	34	416923.....	60	421676.....	37
413168.....	27	416418.....	34	416924.....	60	421677.....	37
413169.....	93	416419.....	34	416925.....	61	421678.....	37
413170.....	38	416420.....	34	416926.....	61	421679.....	37
413171.....	38	416421.....	34	416927.....	60	421680.....	37
413172.....	93	416422.....	34	416928.....	60	421681.....	37
413173.....	93	416423.....	34	416929.....	60	421682.....	37
413174.....	38	416424.....	34	416930.....	60	421683.....	37
413175.....	38	416472.....	34	416932.....	64	421687.....	52
413176.....	93	416700.....	50	416934.....	65	421688.....	52
413177.....	30	416701.....	50	416938.....	66	421689.....	52
413178.....	30	416702.....	93	416940.....	64	421738.....	34
413179.....	30	416703.....	52	416942.....	65	421739.....	34
413180.....	30	416704.....	52	416946.....	66	421740.....	34
413181.....	30	416706.....	52	416948.....	64	421746.....	34
413182.....	30	416707.....	52	416950.....	65	421747.....	34
413183.....	30	416709.....	52	416954.....	66	421748.....	34
413184.....	30	416710.....	52	416975.....	46	421749.....	34
413185.....	30	416712.....	52	416976.....	46	421796.....	38
413186.....	30	416713.....	52	420695.....	37	421797.....	38
413187.....	30	416715.....	52	420696.....	37	421798.....	37
413188.....	30	416718.....	46	420697.....	37	421816.....	50
413312.....	35	416719.....	46	420793.....	77	421821.....	50
413313.....	35	416721.....	46	420794.....	77	421822.....	52
413314.....	35	416724.....	48	420795.....	77	421823.....	52
413334.....	35	416725.....	48	420796.....	77	421848.....	47
413335.....	93	416728.....	48	420797.....	76	421853.....	46
413336.....	93	416729.....	48	420798.....	83	421854.....	48
413417.....	29	416732.....	48	421033.....	33	421855.....	48

421856.....	48
421857.....	48
421858.....	46
421859.....	48
421860.....	48
421861.....	48
421862.....	48
421893.....	37
422159.....	49
422163.....	81
422363.....	50
422364.....	50
422365.....	50
422539.....	50
422540.....	50
422541.....	50
422545.....	50
422546.....	50
422551.....	54
422552.....	54
422553.....	54
422557.....	54
422558.....	54
422559.....	54
422560.....	54
422562.....	54
422564.....	54
422565.....	54
650408.....	93
650422.....	93
650828.....	57
650829.....	57
650830.....	57
650831.....	57
650832.....	57
650833.....	57
839001.....	78
839002.....	78
839003.....	79
839004.....	79
839005.....	78
839006.....	78
839010.....	79
839250.....	88
839251.....	88
839252.....	88
839253.....	89
839260.....	93
839261.....	88
839262.....	88
839263.....	93
839264.....	89
839265.....	89
839266.....	89
839267.....	88
839268.....	89
839280.....	89
TR105.....	81

1. Weiss, A., et. Al., Statistical Brief #154, Readmissions to U.S. Hospitals by Procedure, 2010, Healthcare Cost and Utilization Project, Agency for Healthcare Research and Quality, April 2013. Data derived from readmission rates of colostomy, ileostomy, and other enterostomy procedures.
2. Hyde, L.Z., Al-Masrou, A.M., Kuritzkes, B.A., Suradkar, K., Valizadeh, N., Kiran, R.P. (2018). Readmissions after colorectal surgery: not all are equal. *International Journal of Colorectal Disease*, 33 (12), 1667-1674.
3. Taneja, C., Netsch, D., Rolstad, B.S., Inglesse, G., Lamerato, L., Oster, G. (2017). Clinical and Economic Burden of Peristomal Skin Complications in Patients with Recent Ostomies. *Journal of Wound, Ostomy Continence Nursing*, 44 (4), 350-357.
4. Ostomy, Advocacy page. United Ostomy Association of America website. <https://www.ostomy.org/tag/survey/>. Accessed August 8, 2018.
5. Bulkeley, J.E., McMullen, C.K., Grant, M., Wendel, C., Hornbrook, M.C. Krouse, R.S. (2018). Ongoing Ostomy Self-Care Challenges of Long-Term Rectal Cancer Survivors. *Supportive Care in Cancer*, 26 (11), 3933-3939.
6. ConvaTec Internal in vitro lab testing. OCT o112.
7. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, CWOCN-AP; and Karin Hölzel-Piontek, RN; The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study, *Ostomy Wound Management* 2014;60(12):16-26.
8. Bosio G., Pisani F., Lucibello, L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. *OWM*. 2007; 53(9): 38-43.
9. Clinical Evaluation of Sur Fit Natura Cut to Fit Skin Wafers Gillian Seaton. Technical data on file, reference document WHR13940 TA238 2014.
10. Rolstad, BS. Principles and techniques in the use of convexity. *Ostomy Wound Manage*. 1996. 42(1); 24-32.
11. Pontieri, Lewis V. Basics of ostomy care. *Medsurg Nurs*. 2006; 15(4): 199-202.
12. Hanley, J. Convex stoma appliances: are we getting it right? *British Journal of Nursing (Stoma Supplement)*. 2013; 22(16).
13. Turnbull, GB. The convexity controversy. *Ostomy Wound Manage*. 2003; 49(1): 16-www.o-wm.com/article/1203. Accessed 29 Feb, 2016.
14. DRG data 2015, in T5 markets: Japan, UK, USA, Germany, China .
15. Boyd, K. Clinical Protocols for Stoma Care – Use of convex appliances. *Nursing Standard*. 2004; 18(20): 37-38.
16. Burch, 2011: Management of Stoma Complications. *NursingTimes.net*. 10 Nov 2011.
17. Data on file. Trio Protocol. PMS 002. December 2007. ConvaTec Inc.
18. In-Vitro: Trio Products 110099. Test Report AC-0170. July, 2012. Data on file. ConvaTec Inc.



El programa me+™ se creó para brindar a los pacientes el apoyo, la información y los productos que necesitan para vivir su vida de una manera agradable. Inscribirse es gratis.

Encuentre más información en mepluscare.com.



Profesionales de la salud

**PARA INSCRIBIR A SUS PACIENTES
en el programa me+**

llámenos al 877-585-0470 o envíe
un mensaje por correo electrónico a
conciERGE@convatec.com

 También puede escanear este código para inscribir a sus pacientes en nuestro programa me+.

¿No es un profesional de la salud?

**COMUNÍQUESE HOY MISMO CON NOSOTROS para
unirse al programa me+**

Llame al 1-800-422-8811 o envíe un mensaje
por correo electrónico a CIC@convatec.com



ConvaTec

Ostomy Care

Para obtener información general sobre los productos, vaya a www.convatec.com/ostomy.

Descargo de responsabilidad:

La información sobre reembolsos proporcionada por ConvaTec está destinada a suministrar información general relacionada con la codificación y el reembolso de los productos de ConvaTec únicamente. Las pólizas de cobertura y pago de una misma aseguradora pueden variar de una región a otra y pueden cambiar cada tanto debido a cambios constantes en las normas y reglamentaciones gubernamentales y del sector asegurador. Por lo tanto, confirme los códigos HCPCS con su DME-MAC local, su aseguradora privada o su agencia de Medicaid antes de procesar reclamaciones. ConvaTec no garantiza la cobertura ni el pago de sus productos enumerados en el presente folleto.