



Viktiga produkttegenskaper

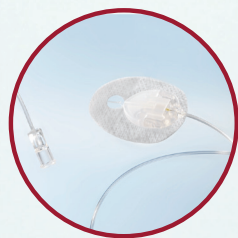

neria™ soft infusionsset är speciellt framtaget för att vara lätt att använda. Enkel och snabb applicering gör att patienten kan klara detta själv i hemmet.

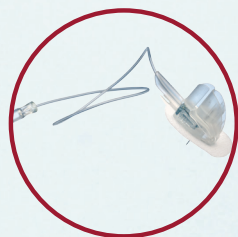

neria™ soft 90 infusionsset ger extra säkerhet med inbyggt nålskydd.



neria™ infusionsset kan användas på magra patienter då den mjuka och flexibla kanylen kan appliceras i olika vinklar. Det genomskinliga fönstret gör det möjligt att inspektera insticks-stället utan att behöva ta bort infusionssetet.

neria™ soft

Varunummer	Slanglängd	Längd mjuk kanyl
79-030-2522	30 cm	13 mm
79-060-2522	60 cm	13 mm
79-080-2522	80 cm	13 mm
79-110-2522	110 cm	13 mm
79-060-2622	60 cm	17 mm

neria™ soft 90

Varunummer	Slanglängd	Längd mjuk kanyl
722030-5226	30 cm	6 mm
722060-5226	60 cm	6 mm
722060-5229	60 cm	9 mm
722110-5229	110 cm	9 mm

10 st/förpackning, 100 förpackningar/kartong



Godkänd
för smärt-
behandling

Subcutan smärtbehandling
Den mjuka vägen för subcutan smärtbehandling

För mer information, besök
www.neria.com


ConvaTec Sweden AB
Box 15138
167 15 Bromma
convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se
®/™ är varumärken tillhörande ConvaTec Inc
©2015 ConvaTec Inc AP-015270-SC



neria™ infusionsset för smärtbehandling

neria™ infusionsset används för subcutan smärtbehandling.

Alla infusionset inom neria™ familjen har utvecklats och är speciellt testade för kontinuerlig subcutan infusion (upp till 3 dagar) med morfin.^{1,2}

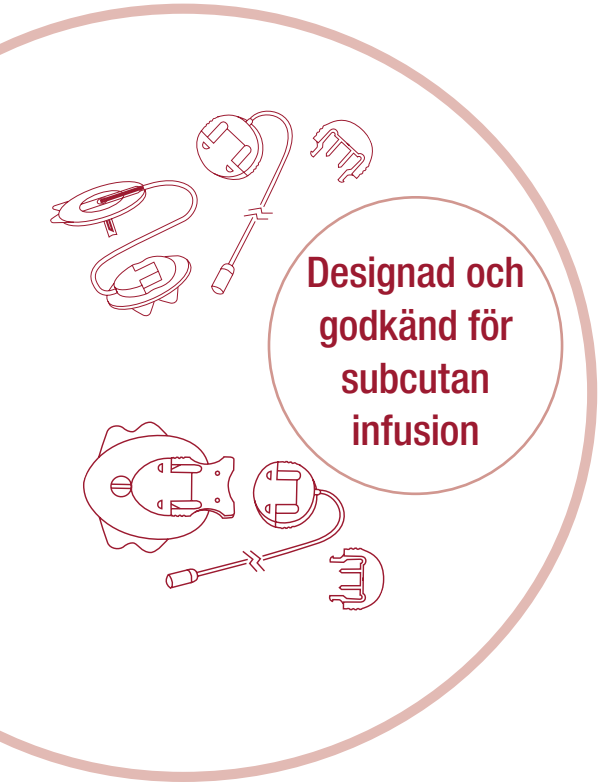

Möjligheten att kunna följa ordinerad behandling har varit ett av huvudmålen under utvecklingen av neria™ produkterna. Produkterna erbjuder enkel, komfortabel, flexibel och säker subcutan infusionsbehandling.

Kliniska studier visar att neria™ infusionsset hjälper till att minska smärta under appliceringen och minskar trauma relaterat till nålsticket.^{3,4}

Valet av neria™ infusionsset ger dig:

Enkelhet

- Enkel införing och applicering.
- Hudvänlig integrerad fixation - inget behov för extra vidhäftning.



Komfort


- Tunn och flexibel kanyl.
- Genomskinligt fönster som gör det möjligt att inspektera insticksstället.
- Tunn nål - hjälper till att minska smärta under införandet.³
- Hudvänlig vidhäftning

Flexibilitet

- Möjlighet för att lossa slangen ökar flexibiliteten.
- Mjuk kanyl med olika insticksvinklar.
- Standard luer-lock fattning som passar de flesta infusionspumparna

Säkerhet

- Speciellt testad för subcutan användning och administrering av läkemedel.^{1,2}
- Integrerad fixation håller den säkert på plats.
- Slang med dubbla lager som är hållbar och har mycket liten fyllnadsvolym.³

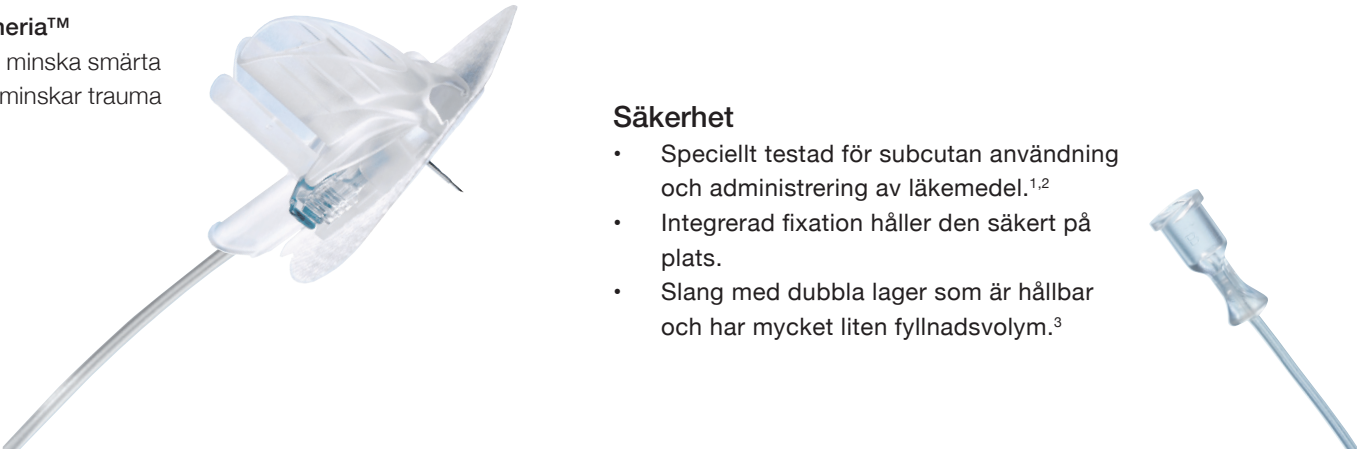

Ingen smärta



Värsta tänkbara smärta



neria™ produktguide

De produkter av neria™ som kan användas för smärtbehandling har en luer-lock koppling av standardtyp. Alla neria™ produkterna är godkända för infusion av morfin^{1,2} och minskar spillet av läkemedel på grund av den lilla innerdiametern i slangen.³

Produktegenskaper	neria™ soft 90	neria™ soft
Kanyl	Mjuk nål	Mjuk nål
Införingsvinkel	90 grader	20-45 grader
Användningstid	72 timmar	72 timmar
Löstagbar slang	Ja	Ja
Kaylens storlek	G27	G27
Nålens längd	6 eller 9 mm	13 eller 17 mm
Slangens längd	30, 60, 110 cm	30, 60, 80, 110 cm
Fixering	Integrerad	Integrerad
Fyllnadsvolym	60 cm - 0.10 ml 80 cm - 0.13 ml 110 cm - 0.18 ml	30 cm - 0.05 ml 60 cm - 0.10 ml 80 cm - 0.13 ml 110 cm - 0.18 ml

¹ Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Morphine Sulfate, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2011, Data on File. Unomedical.
² Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Hydromorphone Hydrochloride, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2011, Data on File. Unomedical.
³ Chan G.C.F., Ng D.M.W. et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J.Hematol,76:398-404
⁴ Parsons J. Infusion line preferences of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing, December 2009, Vol 5 No 12.